

LIGHTTOOTH



E Propulsor Dental - Manual de instrucciones

P Irrigador Dental - Manual de instrução

I Idropulsore Dentale - Manuale d'istruzioni



Agradecemos por ter escolhido este dispositivo, e queremos ressaltar que os produtos da CA-MI Srl têm como objetivo principal proporcionar a plena satisfação do utilizador final e, para isso, todas as suas iniciativas comerciais focalizam-se na busca das soluções técnicas mais inovadoras e, obviamente, no máximo respeito aos padrões de qualidade mais elevados no que se refere à conceção, validação e produção. Cientes de que a boa utilização de um dispositivo influencia diretamente não somente a sua segurança, mas também a sua eficácia e durabilidade, aconselhamos fazer uma leitura atenta de todas as informações contidas neste manual, que possibilitam desfrutar do modo mais seguro e pleno possível todas as potencialidades deste dispositivo, reduzindo ao mínimo os erros de utilização e os danos involuntários ao produto. Conservar este manual para qualquer consulta futura.

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

Quando são utilizados dispositivos elétricos, especialmente na presença de crianças, é indispensável respeitar algumas precauções básicas tais como as que indicaremos abaixo:

PARA A UTILIZAÇÃO SEGURA E CORRETA DO DISPOSITIVO

1. Este produto deve ser utilizado apenas como Irrigador Dental para higiene oral. Utilizações e/ou empregos não condizentes com as indicações do manual de uso devem ser considerados impróprios e, portanto, potencialmente perigosos; nesse caso, o fabricante e o distribuidor não poderão ser responsabilizados.

2. Este produto deve ser utilizado e conservado fora do alcance das crianças ou portadores de deficiências. Uma vigilância atenta de um adulto com plenas faculdades mentais é obrigatória para evitar incidentes ou situações de perigo. As crianças com menos de 8 anos e as pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou que, de qualquer modo, não conhecem o funcionamento deste tipo de dispositivo, podem utilizá-lo apenas com a supervisão de um adulto com plenas faculdades mentais ou depois de receberem suas instruções e entenderem claramente como funciona.

A utilização dos acessórios escovas de dentes associados a este dispositivo por crianças e pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais é possível na presença de um adulto com plenas faculdades mentais ou depois de terem recebido instruções claras sobre a utilização apropriada e segura do produto. A utilização dos acessórios para irrigação oral associados e este dispositivo por crianças com mais de 8 anos e pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais é possível sob a supervisão de um adulto com plenas faculdades mentais. As crianças devem ser impedidas de brincar com o dispositivo. As operações de limpeza e manutenção do dispositivo e dos seus acessórios não devem ser feitas por crianças ou portadores de deficiências sem a supervisão de um adulto com plenas faculdades mentais.

3. A ligação a sistemas não conformes, a utilização de extensões ou adaptadores não previstos no presente manual, a conexão a redes de distribuição elétrica não correspondentes aos dados da placa referidos na parte inferior, uma instalação errada ou a alteração de qualquer uma das partes do dispositivo eximem o fabricante e o distribuidor de qualquer responsabilidade por danos ao produto, a objetos, animais ou pessoas.

4. Utilizar o produto apenas como descrito no presente manual, que deve ser conservado para consultas posteriores, ou conforme as recomendações do seu dentista de confiança.

5. O produto foi aprovado em todos os testes previstos pelas normas de segurança aplicáveis no âmbito da segurança e compatibilidade eletromagnética (EMC), mas para não reduzir o grau de segurança, é importante lembrar-se sempre de:

- controlar sempre a integridade do produto e de todas as suas partes antes de utilizá-lo; se alguma parte do invólucro, do manípulo ou do cabo estiver danificada, não utilizar o produto e procurar um centro de assistência adequado e autorizado;

- utilizar apenas acessórios e peças sobressalentes originais;

- não utilizar o dispositivo simultaneamente com outros dispositivos eletrodomésticos (secador de cabelos, barbeador elétrico, etc.);

- nunca mergulhar o dispositivo em água ou outros líquidos;

6. Nunca colocar ou conservar a unidade em bancadas ou superfícies das quais possa escorregar e cair facilmente para dentro de um elemento sanitário (pia, banheira, duche ou privada).

7. Em caso de queda acidental do produto na água, NÃO tentar extrair ou tocar o dispositivo; primeiramente, deve-se cortar o mais rápido possível a corrente através do interruptor centralizado do sistema elétrico para, em seguida, poder extraí-lo da água.

8. Se o dispositivo cair na água, não tentar ligá-lo ou utilizá-lo, procurar diretamente um centro de serviço competente e autorizado.

9. NUNCA utilizar o dispositivo durante o banho de banheira ou de duche e não tocar a parte elétrica principal com as mãos e o corpo molhados.

- nunca inserir água diretamente no reservatório ligado ao produto. Remover o reservatório da base elétrica enchendo-o com água e, em seguida, colocá-lo corretamente na base elétrica;

- não utilizar alvejante, detergentes ou soluções químicas esterilizantes/desinfetantes para fazer a limpeza do dispositivo. Seguir estritamente as indicações presentes neste manual.

- O dispositivo é protegido contra os respingos, mas por segurança, é necessário manter seco o dispositivo e também a superfície de apoio e utilização;

- nunca apoiar objetos no produto;

- desenrolar sempre completamente o cabo de alimentação para evitar sobreaquecimentos perigosos. O cabo nunca deve ser modificado ou substituído pelo utilizador. Se o cabo não for conforme ao seu sistema elétrico ou se estiver danificado, não utilizar o dispositivo, procurar a assistência aos clientes do distribuidor.

- desligar o produto e desconectar sempre a ficha da rede de alimentação elétrica após a utilização. Este dispositivo nunca deve ser deixado sem vigilância quando estiver conectado à corrente elétrica;

- o funcionamento correto do aparelho pode ser comprometido por interferências eletromagnéticas que estão além dos limites expressos nas normas europeias em vigor.

10. Na parte inferior do produto estão presentes algumas tomadas de ar úteis ao funcionamento do produto.

Nunca utilizar o dispositivo apoiado sobre superfícies que possam obstruir essas tomadas de ar (panos, cobertas, etc.). Controlar sempre se as aberturas não estão obstruídas por cabelos ou qualquer outra coisa.

11. Não deixar cair ou inserir nenhum objeto dentro das aberturas ou orifícios presentes no dispositivo, pois ele pode sofrer danos irreversíveis.

12. O produto é dotado de um regulador do fluxo de água distribuído. Procurar sempre regular o fluxo mais adequado à sua exigência antes de utilizar o produto de modo continuado. Uma pressão baixa demais do fluxo de água pode diminuir a eficácia da limpeza, uma pressão elevada demais pode ser incômoda, principalmente na presença de inflamações preexistentes da cavidade bucal.

13. Nunca utilizar o fluxo de água direcionado diretamente para a parte inferior da língua, para o nariz, orelhas ou outras partes delicadas do corpo! A pressão do fluxo de água exercida por este dispositivo pode danificar áreas do corpo sensíveis à pressão. Nesse sentido, seguir as instruções de utilização indicadas neste manual.

14. A utilização da função de vibração sônica pode ser ativada manualmente pelo utilizador através da pressão do respetivo botão no manípulo se inserção dos acessórios, também denominado punho móvel. A vibração sônica é alimentada por uma pilha descartável colocada dentro do manípulo do irrigador dental. A pilha não deve ser deixada dentro do manípulo se a função não for utilizada ou quando o produto permanecer inutilizado por muito tempo.

15. Para utilizar a função de Vibração Sônica, utilizar única e exclusivamente uma pilha do tipo indicado neste manual, ou seja, pilha alcalina tipo AAA de 1,5 V.

16. NÃO adotar nenhum procedimento de limpeza antes de esvaziar o reservatório de água e remover a ficha da tomada de corrente.

17. Quando o produto não for utilizado, remover a água do respetivo recipiente, ligar o produto para descarregar a água que permaneceu dentro do produto, em seguida, secar e limpar o reservatório e o produto antes de guardá-lo em um local seguro e protegido contra agentes atmosféricos.

18. Se o produto não for utilizado, nunca deixar água dentro dele por mais de 2 dias a fim de evitar a proliferação de bactérias. Nesse caso, substituir sempre a água antes de utilizar o dispositivo.



19. O irrigador dental deve ser utilizado apenas com água fria ou ligeiramente morna; não usar água quente. É possível utilizar soluções específicas (enxaguatórios) em solução com a água do reservatório, mas apenas se forem seguidas as indicações do fabricante previstas neste manual.
20. Não colocar o produto de modo que possa cair. Quedas e impactos bem como a exposição a fontes de calor podem danificá-lo de modo irreversível. Impedir o contacto com cosméticos, óleos, essências e qualquer outro produto químico ou natural não expressamente indicado neste manual, pois podem danificar o produto e/ou as respetivas partes plásticas.
21. O produto pode ser utilizado com água da torneira potável, mas no caso de água com muita concentração de minerais (água dura), a durabilidade do produto, bem com a dos acessórios, pode ser influenciada. Se a água de torneira à sua disposição apresentar alta concentração de calcário (comumente definida como "água dura") poderá ser aconselhável utilizar água comum engarrafada.
22. Este aparelho NÃO é um dispositivo médico. Para aumentar a sua eficácia de utilização é aconselhável seguir sempre as instruções do próprio especialista de confiança a fim de obter uma correta higiene oral.
23. Nunca utilizar na presença de gases e/ou substâncias inflamáveis e/ou explosivas.
24. Para desconectar o cabo da tomada de alimentação, segurar a ficha do cabo e extraí-la. Nunca puxar o cabo para desconectar a ficha da tomada na parede.
25. Este dispositivo deve ser utilizado apenas em ambiente interno. Não utilizar em ambientes externos.
26. Para qualquer anomalia ou avaria, contactar um centro de assistência do distribuidor ou o próprio distribuidor.

ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS

1. A utilização deste dispositivo é desaconselhável para qualquer utilizador que tenha sido submetido a uma intervenção cirúrgica oral ou periodontal nos últimos 12 meses. Nesse caso, não utilizar o dispositivo antes de consultar um médico dentista de sua confiança.
2. Ao modificar ou iniciar um novo programa de higiene oral é possível e normal ocorrer um pequeno sangramento das gengivas. Se houver sangramento excessivo ou um pequeno sangramento que persista por mais de duas semanas desde o início da utilização do dispositivo é aconselhável procurar o próprio médico dentista para fazer um controlo.
3. Não utilizar enxaguatórios que contêm iodo, alvejante ou óleo derivado de árvores.
4. Não utilizar na presença de adornos ou piercings orais. Nesse caso, remover os elementos antes de utilizar o dispositivo.
5. Não utilizar na presença de feridas abertas na boca ou na língua.
6. Se o utilizador estiver submetido a um tratamento de pré-medicação antibiótica, geralmente prescrita pelo médico responsável pelo tratamento ou pelo médico de família, referente a um procedimento dental/oral qualquer, será aconselhável consultar o seu médico dentista antes de começar a utilizar este dispositivo de higiene oral.
7. Supervisionar e instruir corretamente as crianças e as pessoas com necessidades especiais a respeito da utilização correta do dispositivo e dos seus acessórios e impedir que o dispositivo seja utilizado como brinquedo.
8. Os acessórios ponteiros para a massagem gengival e para a limpeza subgengival são dotados na extremidade de uma proteção de borracha contra arranhões, indispensável para a utilização com segurança. NUNCA remover a ponta flexível de material contra arranhões e, se ela for removida ou danificada, NÃO UTILIZAR o acessório e substituí-lo por um novo. A utilização deste acessório sem a proteção de borracha pode ser prejudicial.
9. Durante a utilização é necessário tomar cuidado para que os vários acessórios ponteiros tenham contacto com dentes, gengivas e língua e evitar o contacto com o corpo do manípulo (punho), não realizado para entrar o contacto oral, pois isso poderia dar origem a condições indesejáveis.
10. Utilizar apenas para a limpeza e a higiene oral. Não utilizar para outros fins.
11. Come é habitualmente indicado, ao iniciar um novo programa de higiene oral é aconselhável que antes de utilizarem este dispositivo as pessoas com problemas cardíacos (passados ou presentes) consultem o próprio médico especialista.

COMPONENTES E ACESSÓRIOS

DESCRIÇÃO DE PARTES E ACESSÓRIOS FORNECIDOS

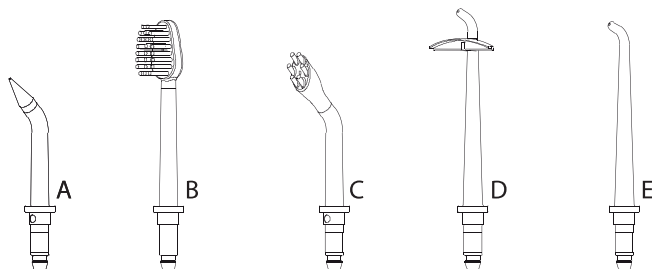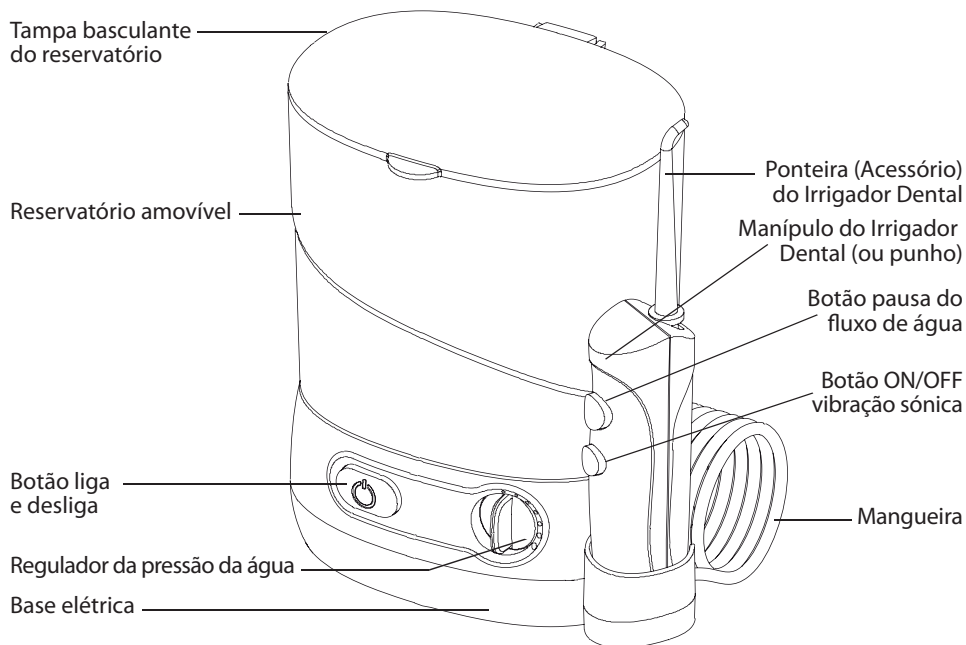

- A Ponteira do Irrigador para limpeza subgengival (com ponta revestida de material macio) - 1 unid.
- B Escova com função irrigador incorporada - 2 unid.
- C Ponteira do irrigador para massagem gengival - 1 unid.
- D Ponteira do irrigador para limpeza da superfície superior da língua - 1 unid.
- E Ponteira do irrigador para limpeza dental - 1 unid.

IMPORTANTE Mesmo estando dentro do mesmo núcleo familiar, é sempre oportuno que cada membro da família utilize o próprio acessório. A utilização promíscua dos acessórios é desaconselhável do ponto de vista higiénico e sanitário, pois pode causar contaminações bacterianas e virais involuntárias.

RECOMENDAÇÃO Os acessórios A - B - C devem ser substituídos depois de no máximo 3 meses de utilização. Os acessórios D e E devem ser substituídos depois de no máximo 6 meses de utilização. A utilização dos acessórios por períodos superiores aos indicados pode prejudicar a sua funcionalidade e eficácia e o seu estado geral de higiene oral. Nunca utilizar acessórios que estiverem danificados ou desgastados; eles devem ser substituídos o mais rápido possível.


PREPARAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO

O Irrigador Dental LighTooth é um dispositivo muito fácil de preparar e de utilizar. Após extrair o dispositivo da embalagem e verificar a integridade do dispositivo, do cabo e dos acessórios contidos, colocá-lo em uma superfície estável e protegida e, então, seguindo todas as indicações/conselhos do parágrafo ADVERTÊNCIAS, adotar com atenção os seguintes procedimentos:

A - INSERÇÃO DA BATERIA NO MANÍPULO DO IRRIGADOR DENTAL

Segurar o manípulo do irrigador dental e, utilizando uma moeda (de 5 -10 ou 20 centavos de €), abrir o compartimento da bateria posicionado na parte inferior. Para abrir, rodar no sentido anti-horário e extrair a tampa da bateria.


Em seguida, inserir uma pilha alcalina tipo AAA de 1.5V prestando atenção para que o polo positivo esteja voltado para a tampa do compartimento da bateria como mostrado na figura abaixo. Recolocar a tampa pressionando-a e rodando-a no sentido horário até travar. **ATENÇÃO** Não utilizar pilhas recarregáveis ou diferentes das de tipo alcalino AAA -1.5V. Se não houver intenção de utilizar a função de Vibração Sônica, a pilha não deverá ser inserida, de modo a evitar possíveis danos provocados pela longa permanência de uma pilha inutilizada.

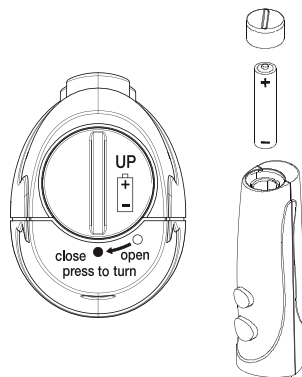

B - INSERÇÃO E EXTRAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

Inserir no orifício presente na parte superior do manípulo o acessório desejado pressionando-o até ao limite, quando emite um ruído característico de encaixe. Depois de ser inserido, o acessório pode ser rodado para a posição desejada. Para extrair e substituir o acessório, basta segurá-lo e puxá-lo para cima com força.

Em várias ponteiros estão presentes algumas indicações coloridas que ajudam a identificar o próprio acessório.

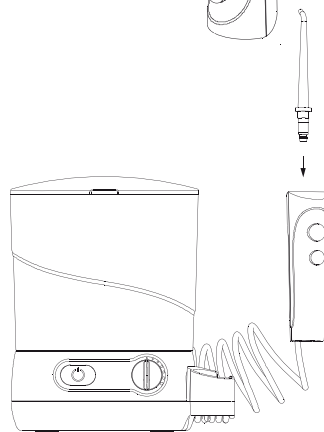


C - ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO

Após extraí-lo da base elétrica, encher o reservatório com água morna ou fria, respeitando as indicações do capítulo ADVERTÊNCIAS. Nunca exceder o volume máximo de 800ml indicado no reservatório.

D - COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

Inserir a ficha de alimentação na tomada elétrica apenas depois de controlar preventivamente se os dados da placa e o tipo de ficha do produto são conformes ao sistema elétrico instalado. **ATENÇÃO** A utilização do dispositivo ligado a sistemas elétricos não conformes às normas nacionais vigentes em termos de segurança e isolamento elétrico representa uma condição de perigo em relação à qual nem o Fabricante nem o Distribuidor ou ponto de venda podem ser responsabilizados em caso de mau funcionamento, dano ao produto ou incidentes a objetos e pessoas.

Pressionar o botão ON/OFF na base elétrica para ligar o dispositivo e, antes de utilizá-lo, verificar se a pressão da água está regulada corretamente conforme a sua exigência.

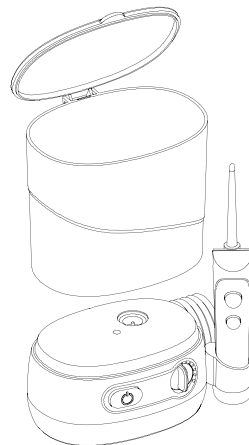

UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO

ATENÇÃO: Durante a primeira utilização ou depois de um longo período de inatividade do produto, é necessário conceder ao dispositivo alguns segundos para reativar a captação de água do reservatório. Nesses casos, antes de ligar o produto, é necessário regular a pressão do fluxo de água no nível máximo (rodando o regulador totalmente para a direita), direcionar a ponteira do irrigador dental para dentro, em seguida, ligar e deixar funcionar o dispositivo até que, após alguns segundos, o fluxo de água comece a sair pela ponteira. A essa altura, definir com o regulador a pressão do fluxo de água mais adequada às próprias exigências e, em seguida, começar a utilizar o dispositivo.

1 Ao utilizar pela primeira vez, regular o manípulo de controlo da pressão no valor mais baixo (ponto pequeno), em seguida, durante a utilização, aumentar gradualmente a pressão até alcançar o valor desejado.

A pressão deve garantir uma limpeza correta e, ao mesmo tempo, ser confortável e **NÃO** incomodar.

2 Pressionar o botão ON/OFF presente no manípulo (punho) do dispositivo apenas se quiser utilizar a função Vibração Sónica que o produto possui.

3 A ponteira acessória para dentro da pia e pressionar o botão de ligação na base elétrica do produto para ativar a unidade.

4 Quando a água começar a escorrer, pressionar e manter pressionado o botão Pausa situado no manípulo para interromper o fluxo de água e conseguir inserir a ponteira na cavidade bucal, libertar o botão para iniciar a "lavagem" da cavidade bucal como descrito a seguir.

Durante esta fase o utilizador pode pressionar ou libertar o botão PAUSA à vontade para satisfazer as próprias exigências.

5 Após terminar o tratamento escolhido, pressionar e manter pressionado o botão PAUSA para colocar a ponteira na pia e descarregar os eventuais resíduos.

6 Desligar o dispositivo pressionando o botão ON/OFF na base elétrica do produto e pressionar o botão ON/OFF situado no manípulo para desativar a Vibração Sónica.

ATENÇÃO: a Vibração Sónica é alimentada de modo independente pelo fluxo do irrigador e, por isso, se não for desligada com o respetivo botão no manípulo, continua a funcionar mesmo com o produto desligado.

UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS - ESCOVA E PONTEIRAS


PONTEIRA DE LIMPEZA DENTAL (ACESSÓRIO E)

Durante a utilização do irrigador dental, manter os lábios ligeiramente fechados para não respingar para fora.

Direcionar o jato de água com um ângulo de 90° em relação à linha gengival como indicado na figura.

Para uma limpeza mais profunda, deslocar lentamente o pontal ao longo da linha gengival.

Seguir o percurso de limpeza indicado na figura até tratar todos os dentes.

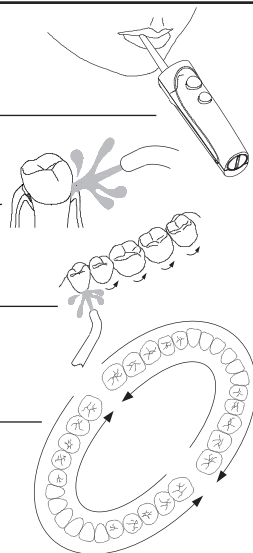


ATENÇÃO:

- Todas as operações apresentadas acima devem ser realizadas sem tocar a borda gengival ou as partes internas da boca com a parte plástica da ponteira do irrigador oral (acessório E).

- No fim do procedimento de limpeza dental, lembrar-se sempre de desligar a unidade pressionando o botão de ligação na base elétrica, verificar se foi desativada a função de Vibração Sônica com o botão ON/OFF situado no manípulo e, em seguida, esvaziar o reservatório de água.

É possível utilizar o acessório PONTEIRA DE LIMPEZA DENTAL (ACESSÓRIO E) também para limpar implantes dentários (aparelhos dentários, etc.) utilizando a mesma técnica descrita acima.

Fazer a limpeza direcionando o fluxo de água ao redor de cada suporte do implante, um dente por vez.

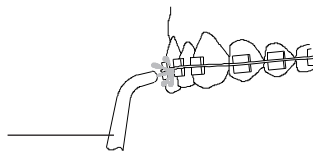
**PONTEIRA DE MASSAGEM GENGIVAL (ACESSÓRIO C)**

Utilizar o acessório ponteira para a massagem gengival ativando também a função Vibração Sônica.

Desse modo, é possível estimular as suas gengivas com uma massagem delicada.

Pressionar o terminal da ponteira para massagem gengival diretamente contra a gengiva, de modo delicado e conforme a imagem abaixo.

Este acessório pode ser utilizado livremente pelo utilizador, com ou sem fluxo de água.

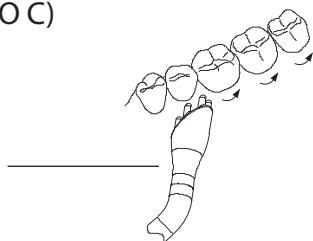**ESCOVA (ACESSÓRIO B) COM FUNÇÃO SÔNICA**

É recomendável utilizar a escova com a Vibração Sônica ativa, para favorecer a remoção de placa bacteriana, tártaro e resíduos. Inserir o acessório ESCOVA no manípulo do dispositivo, colocar na escova a quantidade adequada de pasta dentífrica e começar a escovar os dentes como se fosse uma escova de dentes comum.


ATENÇÃO Durante esta fase, NÃO ligar o produto para evitar a ativação da função irrigador dental.

Após concluir a escovação dos dentes, será possível ligar o produto pressionando o botão de ligação na base elétrica e ativar, assim, também o irrigador dental de água, que ajudará na fase final de enxaguamento. Enquanto esta função estiver ativada, apertar ligeiramente os lábios para evitar respingos.

Após ativar o irrigador, usar o botão PAUSA situado no manípulo para interromper e reativar o fluxo de água necessário para o enxaguamento. Pressionar o botão para interromper o fluxo e libertá-lo para reativá-lo.

Para um perfeito enxaguamento, direcionar o jato ao longo da linha gengival.


ATENÇÃO: No fim do procedimento de escovação, lembrar-se sempre de desligar a unidade pressionando o botão de ligação na base elétrica, verificar se foi desativada a função de Vibração Sônica com o botão ON/OFF situado no manípulo e, em seguida, esvaziar o reservatório de água.

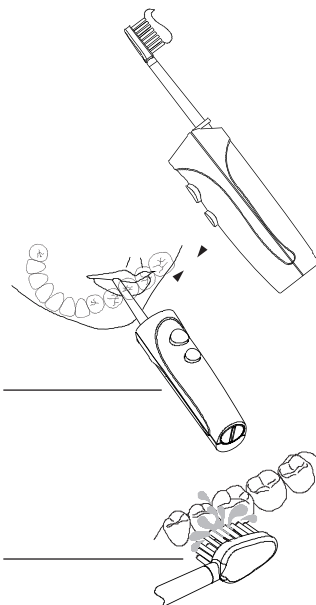

PONTEIRA DE LIMPEZA SUBGENGIVAL (ACESSÓRIO A)

O acessório é projetado para proporcionar o máximo conforto durante a limpeza das cavidades gengivais utilizando o fluxo de água e um eventual líquido antibacteriano (enxaguatório). Para a limpeza subgengival, utilizar apenas este acessório específico, tomando muito cuidado para regular o fluxo de água na pressão mínima disponível. Encostar o terminal de borracha no dente, deixando-o penetrar ligeiramente abaixo da linha gengival e fazendo com que deslize ao longo de toda a linha gengival e nos espaços entre os dentes. Repetir a operação em todas as partes da boca, com adequada frequência.


NÃO UTILIZAR o acessório se estiver danificado ou sem a cobertura de borracha. É aconselhável perguntar ao próprio médico dentista antes de continuar com o procedimento em questão a fim de evitar operações incorretas ou inadequadas a cada utilizador.

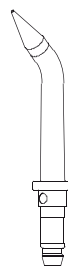

PONTEIRA DE LIMPEZA DA LÍNGUA (ACESSÓRIO D)

Utilizar este acessório para fazer uma limpeza correta da parte superior da língua. Encostar a ponteira na língua, com a parede transversal voltada para a língua e exercendo uma pressão adequada, arrastar a ponteira para fora da boca, mantendo-a constantemente encostada na língua.

Repetir à vontade o movimento sempre de dentro para fora com cuidado para não tocar outras partes da cavidade bucal (palato, dentes, gengivas, etc.) que podem ser arranhadas. Fazer o movimento lentamente e com delicadeza para não danificar partes sensíveis da cavidade bucal. Não colocar o acessório em uma posição muito profunda na cavidade bucal para não provocar ânsia de vômito.

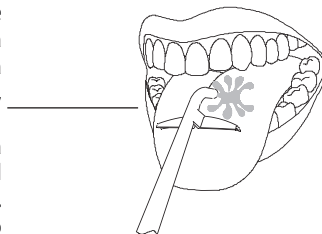

UTILIZAÇÃO COM ENXAGUATÓRIOS

Este dispositivo pode ser utilizado em conjunto com enxaguatórios adequados ou soluções antibacterianas. É aconselhável perguntar ao próprio médico dentista qual é o produto mais adequado para cada caso e, evidentemente, qual é o modo melhor para utilizá-lo.

Independentemente do tipo de enxaguatório ou solução antibacteriana utilizada, o uso dessas soluções pode reduzir a vida útil do dispositivo, então, após utilizar uma solução qualquer em conjunto com este dispositivo, é indispensável fazer a operação de limpeza descrita a seguir. Esvaziar e enxaguar com atenção o reservatório, em seguida, enchê-lo com 200 ml de água quente (nível mínimo do reservatório) e recolocá-lo na base elétrica. Direcionar o manípulo com o acessório montado para dentro da pia e ligar o irrigador dental, deixando-o funcionar até esvaziar o reservatório. Desse modo, os resíduos da solução utilizada ainda presentes no circuito interno serão removidos.

NOTA: Para evitar desperdícios da solução utilizada, introduzir no dispositivo um volume de enxaguatório não excessivo e suficiente para uma única aplicação.

POSSÍVEIS AVARIAS E RESPETIVAS SOLUÇÕES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
A função Vibração Sónica não funciona	1. Bateria Esgotada 2. Contactos da bateria sujos 3. A tampa do compartimento da bateria não está fechada corretamente 4. O botão ON/OFF no manípulo está na posição OFF (desligado)	1. Substituir a bateria 2. Limpar os contactos com um pano de algodão 3. Rodar e fechar corretamente a tampa do compartimento da bateria 4. Pressionar o botão ON/OFF
Fugas do reservatório de água	A válvula do reservatório ou o seu alojamento estão sujos	Limpar a válvula e o seu alojamento quando estiver indicado no manual
Pressão baixa do jato de água	1. O reservatório não está colocado corretamente 2. Os acessórios ponteiras estão obstruídos por detritos ou resíduos 3. O regulador está definido no nível de baixa pressão	1. Recolocar na posição correta o reservatório e encaixá-lo com firmeza na base 2. Utilizar outro acessório para verificar o seu funcionamento. Se houver algum obstáculo, removê-lo, caso contrário, substituir o acessório por um novo. 3. Atuar no regulador para aumentar a pressão.
O dispositivo NÃO liga	Falta de corrente elétrica	Verificar se o cabo de alimentação foi conectado a uma tomada de corrente adequada e funcional. Verificar se foi pressionado corretamente o botão de ligação na base elétrica.
Se nenhuma dessas soluções indicadas acima resolver os problemas de funcionamento encontrados, não realizar pessoalmente nenhuma intervenção e procurar o centro de assistência aos clientes do Distribuidor.		

LEGENDA DE SÍMBOLOS

	Marca de conformidade das diretivas Europeias
	Ler atentamente e conservar o manual de instruções
	Aparelho com classe de isolamento II
	Corrente alternada
	Corrente contínua
	MANUFACTURER
IPX7	Grau de proteção dos Invólucros
	Botão Liga/Desliga

MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO

Em caso de avaria ou funcionamento anómalo, procurar a assistência aos clientes do Distribuidor. Nenhuma parte do produto pode ser reparada ou controlada por pessoal não autorizado pelo Fabricante ou pelo Distribuidor. Nenhuma parte interna requer manutenção ou lubrificação. A execução de controlos ou reparações por pessoal não autorizado invalida a garantia e exime o Fabricante e o Distribuidor de qualquer responsabilidade.

GARANTIA DO FABRICANTE

O Fabricante garante os seus produtos por um período de 24 meses a partir da data de compra. De acordo com esta garantia, o fabricante obriga-se unicamente a reparar ou substituir gratuitamente o produto ou as suas peças que resultarem avariadas após verificação realizada nos seus estabelecimentos pelo Serviço de Assistência Técnica. O produto deve ser devolvido acompanhado de uma descrição do defeito constatado e da Nota Fiscal, indispensável para poder usufruir dos termos da Garantia. A Garantia, com exclusão de responsabilidade por danos diretos e indiretos, é limitada apenas aos defeitos de material e/ou de fabricação e perde a sua validade se as peças enviadas resultarem desmontadas, violadas ou reparadas fora da Fábrica ou dos Centros de Assistência Autorizados. O aparelho enviado, mesmo se estiver sob garantia, deverá ser enviado com o FRETE PAGO PELO REMETENTE. A mercadoria viaja sempre por conta e risco do Cliente, sem que haja qualquer responsabilidade do Fabricante em caso de danos causados pelo transporte ou perda por parte da empresa de expedição, mesmo se enviada com o frete pago pelo remetente. A bateria/pilha incluída na embalagem não tem cobertura de Garantia fornecida pelo Fabricante e Distribuidores deste dispositivo.

INSTRUÇÕES PARA A GESTÃO DAS BATERIAS

- Utilizar única e exclusivamente baterias do tipo e da dimensão indicada neste manual. Verificar sempre se os contactos da bateria e do dispositivo estão limpos
- Assegurar-se sempre de inserir a bateria com a polaridade (+ e -) na posição correta
- Remover sempre a bateria do aparelho se não for utilizado por um longo período
- Remover imediatamente do produto as baterias usadas

ADVERTÊNCIAS PARA A CORRETA ELIMINAÇÃO DO PRODUTO SEGUNDO A DIRETIVA EUROPEIA 2012/19/UE-REEE:

Ao terminar a sua vida útil o produto não deve ser eliminado com os resíduos urbanos. Pode ser entregue a centros autorizados de coleta diferenciada predispostos pelas administrações locais ou ao distribuidor em caso de compra de um novo aparelho do mesmo tipo e com as mesmas funções. Eliminar separadamente o produto permite evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde provocadas pela sua eliminação inadequada e permite recuperar os materiais que o constituem, obtendo uma importante poupança de energia e de recursos. O símbolo presente na etiqueta de dados indica a recolha separada de aparelhos elétricos e eletrónicos.

Atenção:

A eliminação incorreta de aparelhos elétricos e eletrónicos pode implicar em sanções.



TRATAMENTO DAS PILHAS GASTAS (Diretiva 2006/66/CE)

Este símbolo no produto indica que as pilhas não devem ser consideradas como resíduos urbanos comuns. Certificando-se de que as baterias sejam eliminadas corretamente é possível contribuir para prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde que podem ser causadas pela sua eliminação inadequada. A reciclagem dos materiais ajuda a preservar os recursos naturais. Entregar as pilhas usadas aos pontos de recolha indicados para a reciclagem. Para maiores informações sobre a eliminação das baterias usadas ou do produto, é possível contactar a administração local, o serviço de recolha de resíduos ou a loja em que o aparelho foi comprado.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	LIGHTTOOTH
REF/Código:	BD 100000/01
Alimentação do Irrigador Dental:	100-240V - 50/60Hz
Potência Absorvida do Irrigador Dental:	Max 15W
Alimentação da Vibração Sônica:	1 pilha alcalina tipo AAA de 1,5 V
Corrente Absorvida pela Vibração Sônica:	0.19A
Peso:	0.400 kg approx
Dimensões:	111 x 150x 197 (H) mm
Volume do reservatório:	800 ml Max
Proteção da base elétrica contra água:	IPX4
Proteção do manípulo contra água:	IPX7

CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO

Temperatura ambiente: 10 ÷ 40 °C

Percentual de humidade ambiente: 10 ÷ 95 %RH

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E DE TRANSPORTE

Temperatura ambiente: -25 ÷ 70 °C

Percentual de humidade ambiente: 10 ÷ 95 %RH

Produto testado em conformidade com as Diretivas Comunitárias e com as Normas Europeias aplicáveis no âmbito da segurança elétrica, compatibilidade eletromagnética, eliminação e proteção ambiental.

LIGHTTOOTH



CA-MI srl - Via Ugo La Malfa 13 - 43010 Pilastro (Pr) - Italy
Tel. +39 0521 637133 +39 0521 631138 - Fax +39 0521 639041
export@ca-mi.it - vendite@ca-mi.it - www.ca-mi.it



BD0012 - Rev. 01 del 10.2015

Made in China