



CORFOU BEDTABLE *Manual de instruções* - MEDICAL DEVICE

REF. 823125 – 823126 – 823127

SÍMBOLO QUE APARECE NO RÓTULO OU NO MANUAL DE INSTRUÇÕES

	<i>Endereço do fabricante</i>		<i>Convite para ler o manual do utilizador</i>
	<i>Data de produção</i>		<i>Siga as instruções de segurança</i>
	<i>Número do lote</i>		<i>Conformidade CE</i>
	<i>Referência do produto</i>		<i>Não tolera humidade</i>
	<i>Peso máximo do utilizador</i>		<i>Dispositivo médico</i>

MANUAL DE INSTRUÇÕES PT

IMPORTANTE

Leia atentamente as instruções antes de utilizar este produto e guarde-as, se necessário.

Utilizador: Se não conseguir ler ou compreender quaisquer avisos, precauções ou instruções, contacte o seu profissional de saúde ou distribuidor antes de utilizar este produto ou podem resultar riscos e danos.

Consulte o seu médico ou profissional de saúde antes de usar um andador. Ele / ela irá aconselhá-lo e informá-lo sobre a técnica de caminhada mais adequada para você.

Distribuidor: este folheto informativo deve ser administrado aos utilizadores deste produto.


DESTINO DO PRODUTO

A mesa de cama Corfou é um dispositivo médico. Este produto permite-lhe ler e comer na cama com total conforto. A altura e a inclinação do tampo da mesa podem ser ajustadas para se adaptarem a diferentes momentos do dia. A altura pode ser facilmente ajustada usando o jack.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO


823125 (No. 1) - 823126:

1. Bandeja fixa pequena
2. Bandeja basculante grande
3. Perna em forma de U
4. Rodízio sem freio
5. Vertical vertical
6. Suporte de inclinação
7. Rodízio com freio
8. Placa em forma de U
9. Placa espaçadora
10. Parafuso de cabeça hexagonal
11. Parafusos
12. Lavadora plana
13. Lavadora dividida
14. Botão da estrela
15. Tecla plana

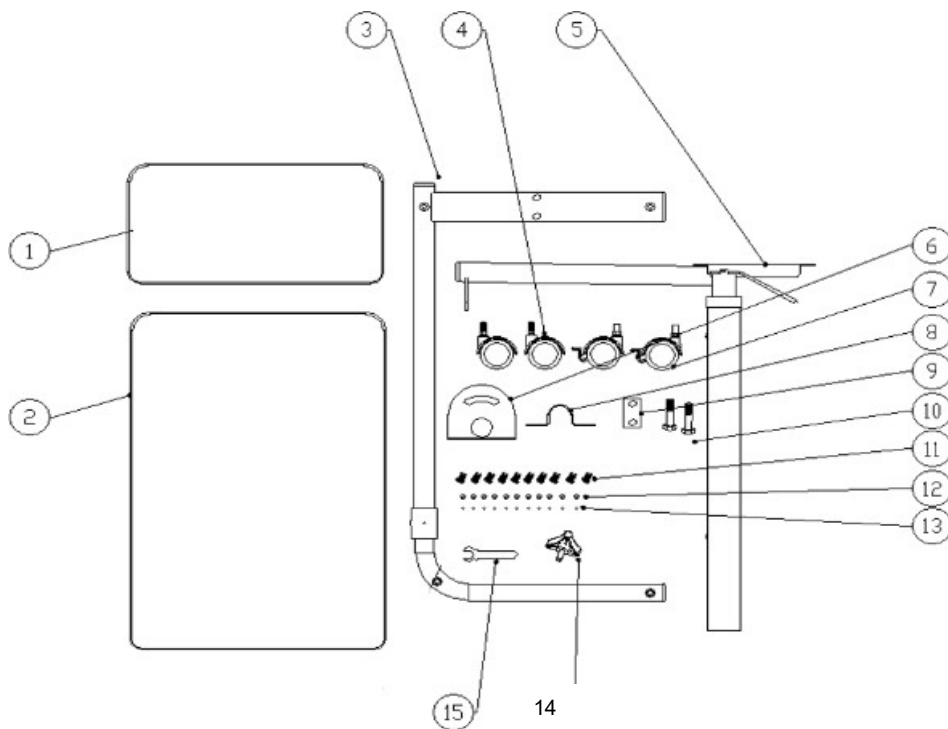

823127 :

1. Bandeja fixa
2. Bandeja basculante
3. Perna em forma de U
4. Rodízio sem freio
5. Vertical vertical
6. Suporte de inclinação
7. Rodízios com freio
8. Peça em forma de U
9. Placa de lavadora
10. parafuso de cabeça hexagonal
11. parafuso
12. anilhas
13. arruelas de mola
14. Nozes
15. Tecla plana
16. Botão da estrela

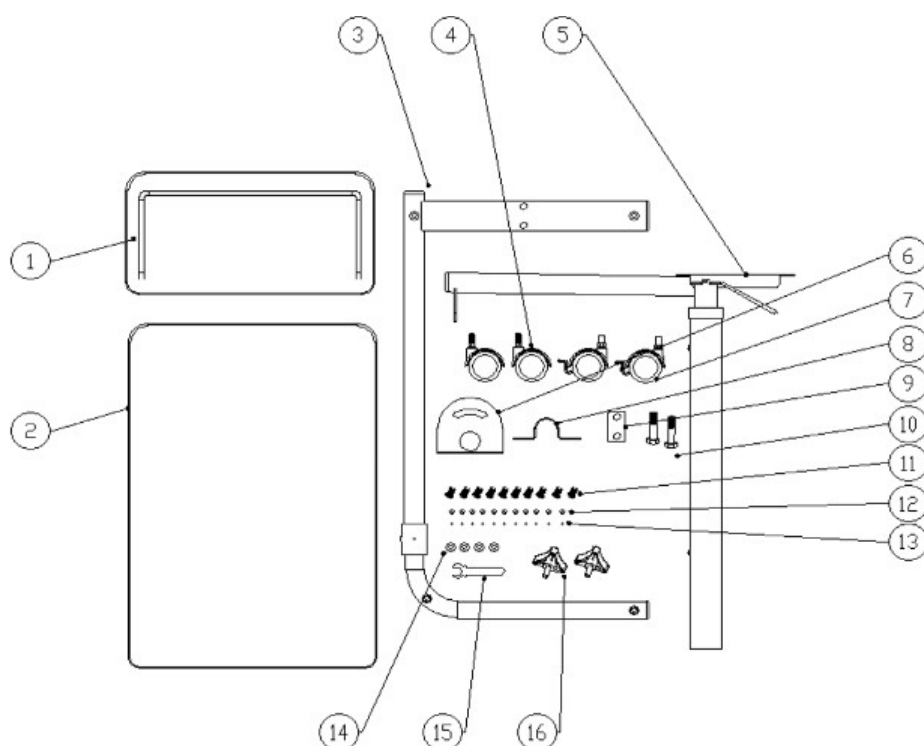


MONTAGEM E UTILIZAÇÃO

823125 (sem pequena placa fixa n.º 1) - 823126 :

Passo 1 :


Enrosque as rodas (4) e (7) sob o pé em forma de U (3) utilizando a chave inglesa aberta.

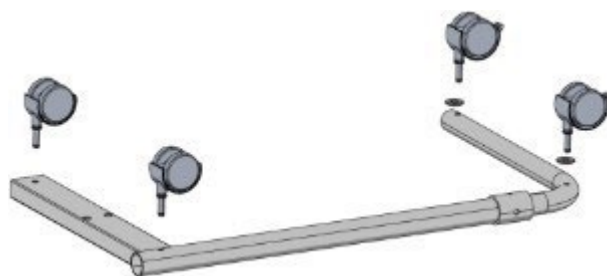

2º Passo:


Coloque as bandejas (1) e (2) (orifícios virados para cima) numa superfície plana. Alinhar os orifícios na vertical (5) com os orifícios na pequena bandeja (1). Prepare os parafusos (11) rosqueando primeiro uma máquina de lavar dividida (13) e, em seguida, uma máquina de lavar plana (12) em cada parafuso. Enrosque a placa vertical (5) na placa pequena (1).


Colocar a placa em forma de U (8) à volta do tubo e enrosca-la na placa grande (2). Coloque o suporte de inclinação (6) e enrosque-o na seringa placa grande (2). Enrosque e aperte a placa grande com o botão estrela 14.

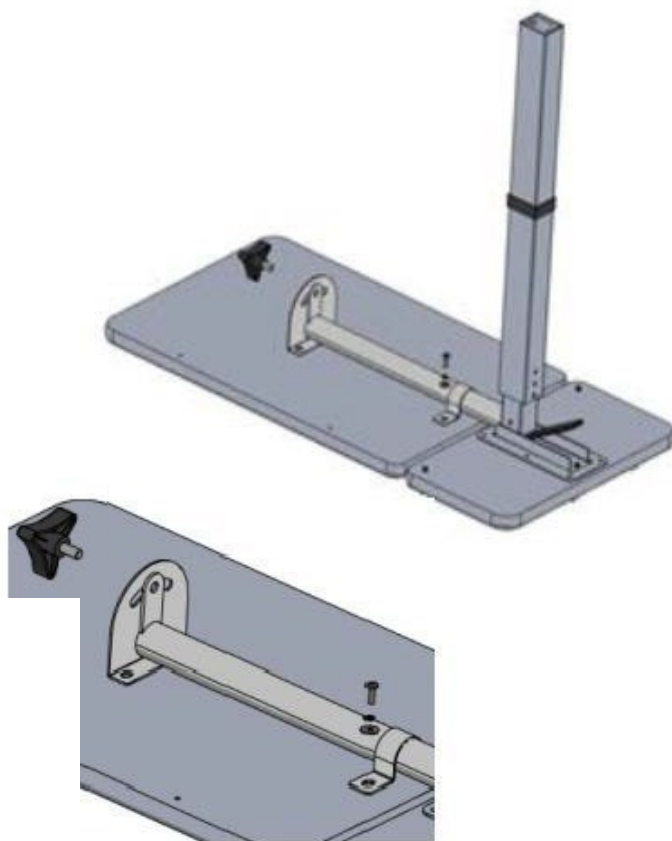

3º Passo:

Instale a perna em U (3) na vertical (5) e coloque a placa espaçadora (9), alinhando os orifícios. Montar com os parafusos de cabeça hexagonal (10). Aperte com chave inglesa.

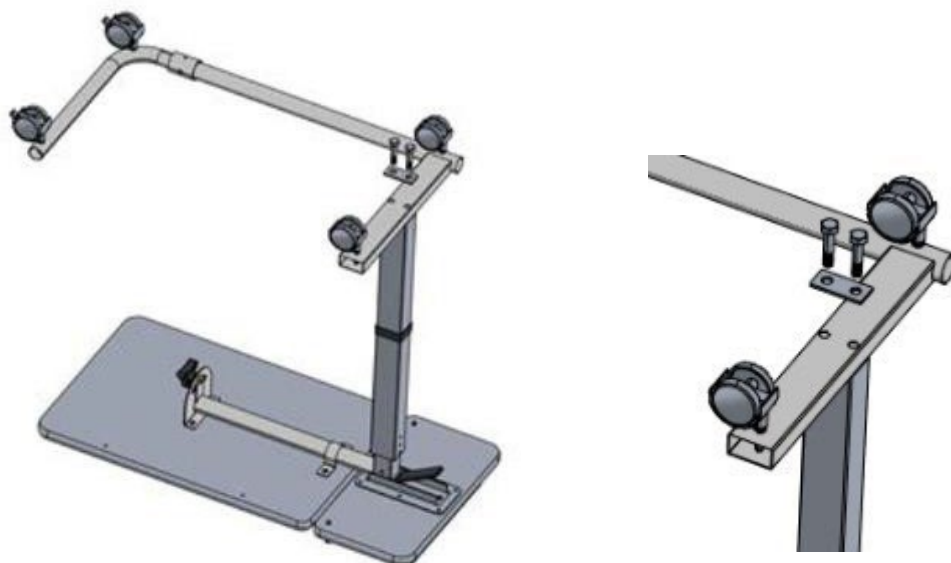


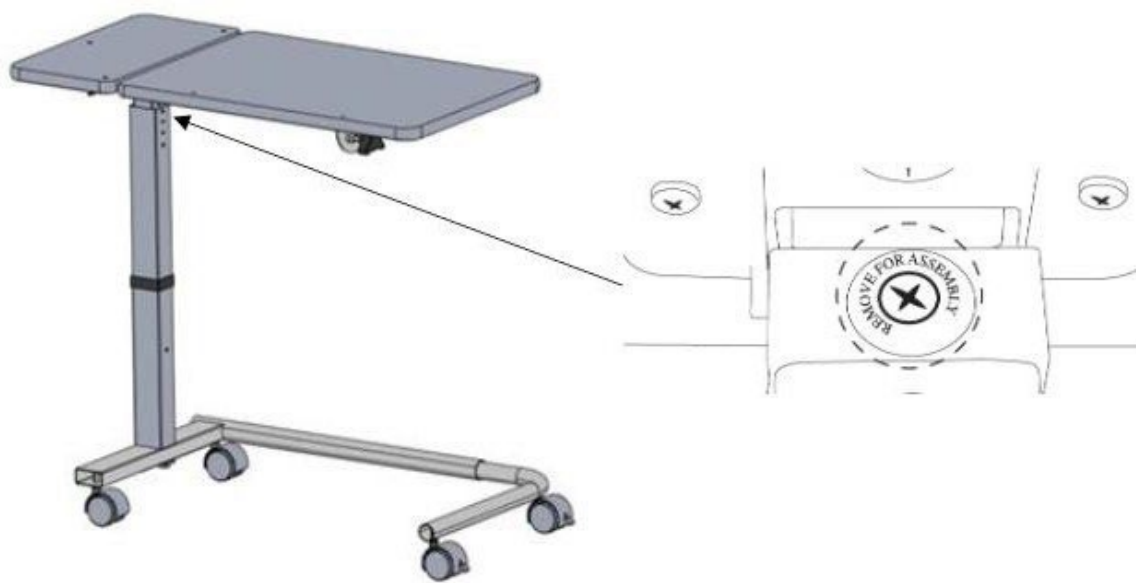

Utilização e precauções : Antes de utilizar pela primeira vez, solte o parafuso preto localizado na parte superior vertical vertical (5), imediatamente abaixo da bandeja (1). Este parafuso é usado para bloquear o macaco vertical. Deve ser novamente apertado se a mesa de cama for transportada.

Ajuste a altura da mesa de cabeceira Corfou para a altura correta puxando a alavanca de ajuste vertical do poste enquanto levanta ou abaixa a bandeja e, em seguida, solte a alavanca. O bloqueio e desbloqueio dos travões nos rodízios (7) é feito utilizando a pequena alavanca colocada em cada rodízio.

Para inclinar o prato grande, solte ligeiramente o botão da estrela 14, incline o prato e, em seguida, aperte o botão da estrela novamente.

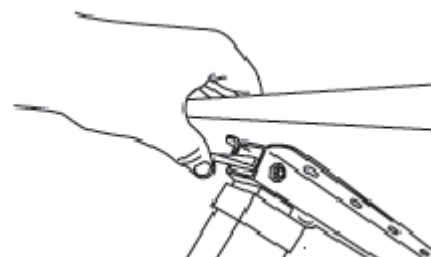

Cuidado: Verifique se a mesa está corretamente montada e aperte os parafusos regularmente. Utilize sempre numa superfície plana. Mantenha sempre os travões travados quando a mesa não estiver a ser utilizada. Não sobrecarregue a mesa.


823127 :

Passo 1 : Enrosque as rodas (4) e (7) sob o pé em forma de U (3) utilizando a chave inglesa aberta.

Passo 2: Coloque as bandejas (1) e (2) (orifícios virados para cima) sobre uma superfície plana. Alinhar os orifícios na placa vertical vertical (5) com os orifícios na pequena placa (1). Preparar os parafusos (11) rosqueando primeiro uma máquina de lavar dividida (13) e, em seguida, uma máquina de lavar plana (12) em cada parafuso. Enrosque a placa vertical (5) na placa pequena (1).


Colocar a placa em U (8) à volta do tubo e enrosca-la na placa grande (2). Coloque o suporte de inclinação (6) e enrosque-o na seringa

Enrosque-o na placa grande (2). Enrosque e aperte a placa grande com o botão estrela (16)

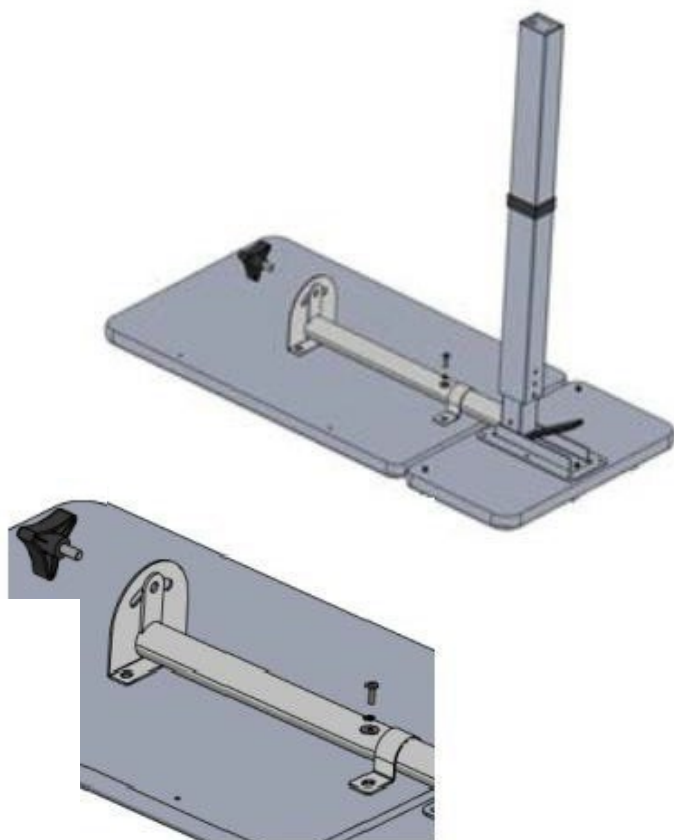



3º Passo:

Instale o pé em U (3) na vertical (5) e coloque a placa espaçadora (9), alinhando os orifícios. Montar com os parafusos (10). Aperte com a chave aberta.

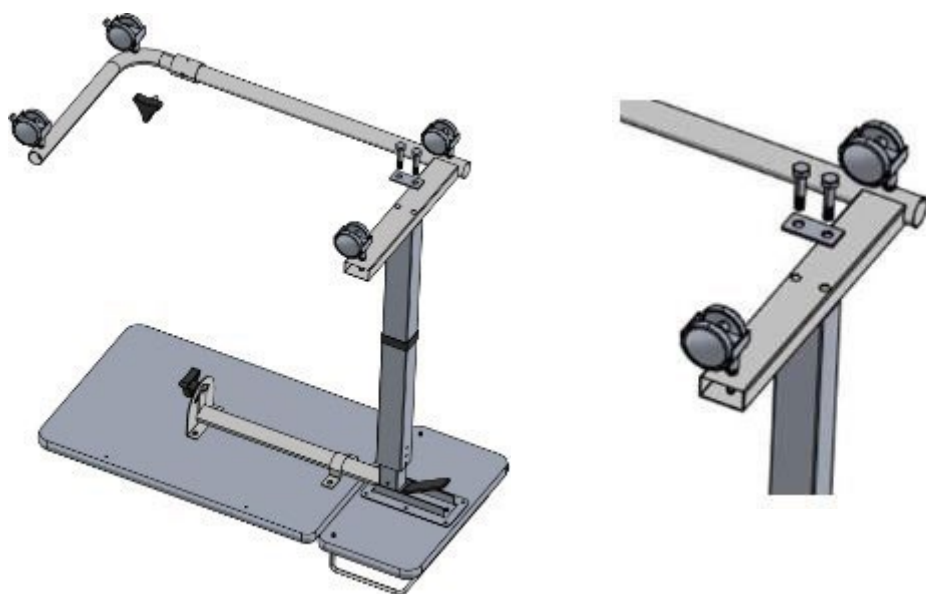

A largura de passagem do pé em forma de U (3) pode variar de 60 a 78 cm. Para aumentar ou reduzir esta largura de passagem, desenrosque o botão (16), ajuste a largura e, em seguida, enrosque novamente o botão.

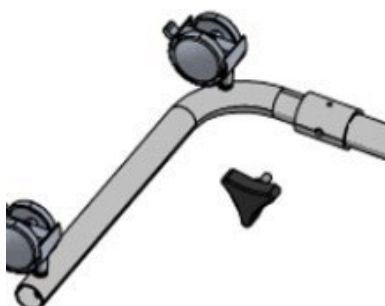


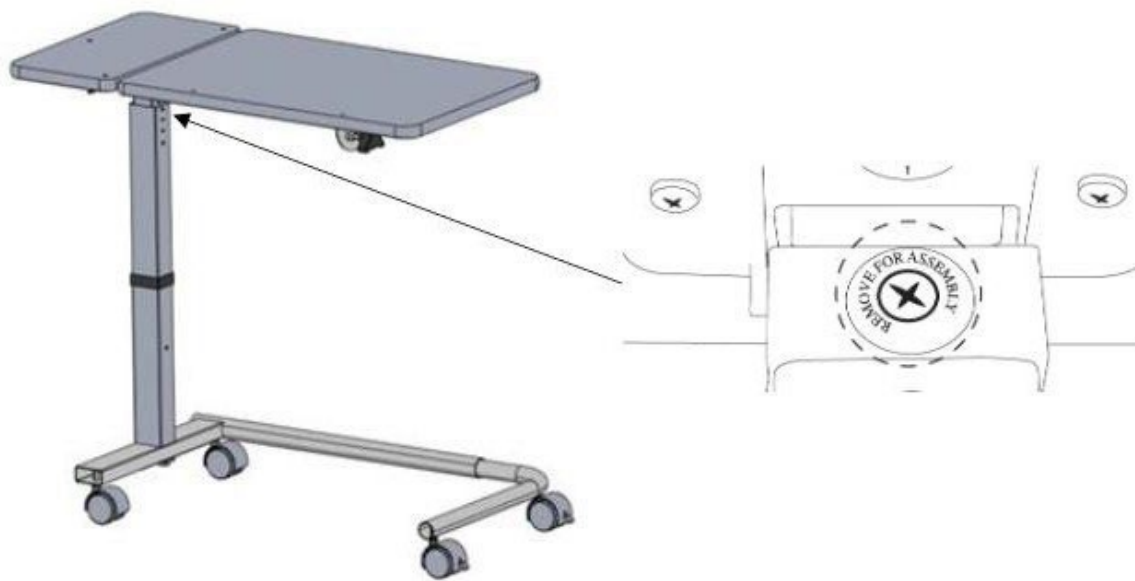

Utilização e precauções : Antes de utilizar pela primeira vez, solte o parafuso preto localizado na parte superior vertical vertical (5), imediatamente abaixo da bandeja (1). Este parafuso é usado para bloquear o macaco vertical. Deve ser novamente apertado se a mesa de cama for transportada.

Ajuste a altura da mesa de cabeceira Corfou para a altura correta puxando a alavanca de ajuste vertical do poste enquanto levanta ou abaixa a bandeja e, em seguida, solte a alavanca. O bloqueio e desbloqueio dos travões nos rodízios (7) é feito utilizando a pequena alavanca colocada em cada rodízio.

Para inclinar o prato grande, solte ligeiramente o botão da estrela 16, incline o prato e, em seguida, aperte o botão da estrela novamente.

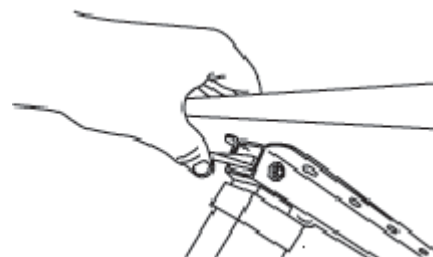

Cuidado: Verifique se a mesa está corretamente montada e aperte os parafusos regularmente. Utilize sempre numa superfície plana. Mantenha sempre os travões travados quando a mesa não estiver a ser utilizada. Não sobrecarregue a mesa.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA



A não observância das precauções de utilização pode resultar no risco de lesões graves.

- Use a mesa de cama apenas conforme descrito neste manual.
- Não exceder o peso máximo de 15 kg
- Instale a mesa de cama sobre uma superfície plana.
- Guarde a mesa de cama dentro de casa, longe de mofo e poeira.
- Verifique se os botões de ajuste funcionam corretamente antes de usar.
- Antes de usar, verifique se todas as peças estão presentes e em bom estado. Em caso de danos, contacte o seu concessionário.
- Siga cuidadosamente as instruções de montagem e certifique-se de que todos os componentes estão corretamente fixados antes de utilizar.
- Antes de usar, aplique os freios nos rodízios.
- Se alguma peça estiver danificada, partida ou gasta, contacte o seu concessionário.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO



A falta de cuidados e monitorização do seu produto pode resultar no risco de ferimentos graves.

- Limpe o produto regularmente com água morna, um pano macio e um detergente neutro.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham fenol ou cloro, pois estes podem danificar materiais de alumínio e poliamida.
- Seque com um pano macio, limpo e seco.
- Certifique-se de que não há acumulação de sujidade no produto.
- Verifique periodicamente o desgaste e a resistência de todos os parafusos. Substitua todas as peças quebradas, danificadas ou desgastadas imediatamente.
- Verifique regularmente o funcionamento dos travões nos rodízios e o funcionamento do macaco.
- Em caso de avaria, não repare a mesa. Consulte um revendedor autorizado.

RECICLAGEM

Quando o produto se tornar inutilizável e tiver de o deitar fora: contacte o seu revendedor especializado. Se desejar realizar a reciclagem por conta própria, peça orientações sobre a eliminação à sua empresa local de gestão de resíduos.

ARMAZENAGEM



A inobservância das condições de conservação pode conduzir à deterioração do produto e, por conseguinte, ao risco de prejuízo grave.

Não guarde o seu produto durante um longo período de tempo perto de uma fonte de calor ou ao sol (por exemplo, atrás de uma janela ou perto de um radiador) ou perto de uma fonte fria.

Manter afastado de todas as chamas e fontes de faíscas.

Respeite as condições de armazenamento e arrumação do seu produto.

- Em lugar seco e temperado
- Proteja o seu produto embalando contra poeira, corrosão (por exemplo, elementos abrasivos, areia, água do mar, ar salgado).
- Guarde todas as peças removidas juntas no mesmo local (ou localize-as, se necessário) para evitar misturá-las com outros produtos durante a remontagem.
- Todos os componentes devem ser armazenados sem qualquer carga (não coloque objetos muito pesados nos componentes do produto, não emperre nada...).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões	823125 : Dimensões do topo: largura 76 x profundidade 38 x altura 72 a 99,5 cm. Dimensões da perna: 69 x 37 cm. Largura livre 60,5 cm. 823126 : Dimensões bandeja grande/bandeja pequena largura 56/20 x profundidade 38 x altura 72 a 99,5 cm. Dimensões da perna: total 69 x 37 cm. Apuramento largura 60,5 cm. 823127 : Dimensões bandeja grande/bandeja pequena: largura 56/20 x profundidade 38 x altura de 72 a 99,5 cm. Largura livre: 60 a 78 cm
Peso	823125 : 9,5 kg 823126 : 9,8 kg 823127 : 11,3 kg
Peso máximo suportado	15 quilogramas

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO


A expectativa de vida deste produto é de 5 anos em condições normais de uso, segurança e manutenção. Para além deste período, o produto pode ser utilizado desde que ainda esteja em boas condições.

GARANTIA

Este produto tem garantia de dois anos a partir da data de compra pelo utilizador. A IDENTITIES fornecerá peças de reposição para qualquer peça que tenha quebrado devido a um defeito de fabricação, projeto ou material. Entre em contato com o distribuidor de quem você comprou o produto para o caso de precisar fazer uma reclamação. Falhas resultantes de danos acidentais, uso indevido, alteração ou desgaste não são cobertas por esta garantia. Entre em contato com o revendedor de quem você comprou o produto para aplicar a garantia.



Identities – ZA Pole 49 Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU

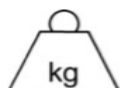

Poids máxima autorisé Peso
máximo autorizado Peso
máximo permitido Peso
máximo suportado
15 quilogramas