

Manugrip

pt

Prezado cliente, agradecemos sua confiança em um produto da EMO. Ao escolher uma órtese da marca Manugrip, você adquiriu um produto médico e sanitário de alta qualidade. Leia estas instruções cuidadosamente. Se tiver alguma questão, contacte o seu médico ou o seu estabelecimento especializado.

REGULAMENTOS

O dispositivo médico está em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre dispositivos médicos e os respectivos regulamentos nacionais. Dispositivo médico de classe I, não estéril, sem função de medição.

DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

O Manugrip MQ701 é um imobilizando cinta articulação do punho. Tem uma forma anatômica que estabiliza e imobiliza o conjunto mantendo a mobilidade dos dedos. Tecnicamente avançada: fabricação de micro- fusão evita pressão e arranhões como é feita sem costuras. Leve: materiais feitos de força máxima e espessura mínima. Ele incorpora placas de alumínio e removíveis forma: palmares, ulnar e radial. Colocação com uma única mão: correias de ajuste perto de si para facilitar o ajustamento colocación. El é feita através de algumas tiras que passam por fivelas multiplicam uma força de tração eo ajuste fácil. Tecido respirável espuma. Bilateral. S (14-18 cm) , L (18-22 cm)

INDICAÇÕES

Lesões do pulso -comum, sem fratura, imobiliza-ção controlada da instabilidade articular, articulação, síndrome do túnel do carpo, sinovite pós - operatório, artrose, entorses de repetição de pulso.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E COLOCAÇÃO

O produto deve ser adaptado pelo protético ou pelo médico individualmente para cada paciente. A escolha correcta do tamanho é essencial para alcançar a eficácia máxima do tratamento e prolongar a vida útil da peça de vestuário . Solte as tiras e garantir sobre si mesmos. Verificar a conformação das tiras e adaptado à morfologia do paciente , se necessário. Digite a mão machucada e ajustar. O paciente pode entrar e sair do manguito sem mobilizar apenas a ponta, facilitando os exercícios de reabilitação e de higiene pessoal.

PRECAUÇÕES

Siga as instruções do fabricante para a colocação adequada da órtese. Siga as instruções ou recomendações do prescritor ou pessoal de saúde. Para uma adaptação personalizada, consulte um especialista. Se a dor persistir, é aconselhável entrar em contato com um profissional de saúde. Se tiver uma reação alérgica a remover o produto e consultar o médico prescritor. Não exponha a roupa para uma chama ou fonte de calor em temperaturas muito altas. Guarde à temperatura ambiente, de preferência, na embalagem original. Garantia no âmbito das leis.

LAVAGEM E MANUTENÇÃO

Lavar as mãos com água morna (máx. 30 °) e sabão neutro. Durante a lavagem , se a peça tem Velcro , eles devem ficar juntos , ou mantê-los fechados . Seca-se à temperatura ambiente. Não passar a ferro a loja de vestuário. O contacto com as pomadas, cremes álcool e solventes podem danificar a peça de vestuário.



CERTIFICADOS DE QUALIDADE

Todos os materiais utilizados foram testados, em conformidade com a regulamentação europeia, são de alta qualidade e oferecer o máximo de segurança e conforto durante o uso. Öko -Tex Standard 100: têxtil eco -label concedido após a conclusão de um catálogo de critérios de análise que garante a ausência de substâncias nocivas à saúde. Certifica a ausência de substâncias nocivas, em todos os materiais com os quais uma peça de vestuário é feita.

AVISO

Para descartar o produto, use o recipiente para resíduos sólidos. Para o descarte do recipiente, dependendo do material, utilize o recipiente de papel / papelão ou o recipiente de plástico. Em qualquer caso, você deve cumprir rigorosamente os regulamentos do país. Qualquer incidente grave relacionado com o produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e / ou o doente se encontram estabelecidos.




EMO
especialista
en ortopedia

Manugrip

Inmovilizadora de muñeca

MQ701

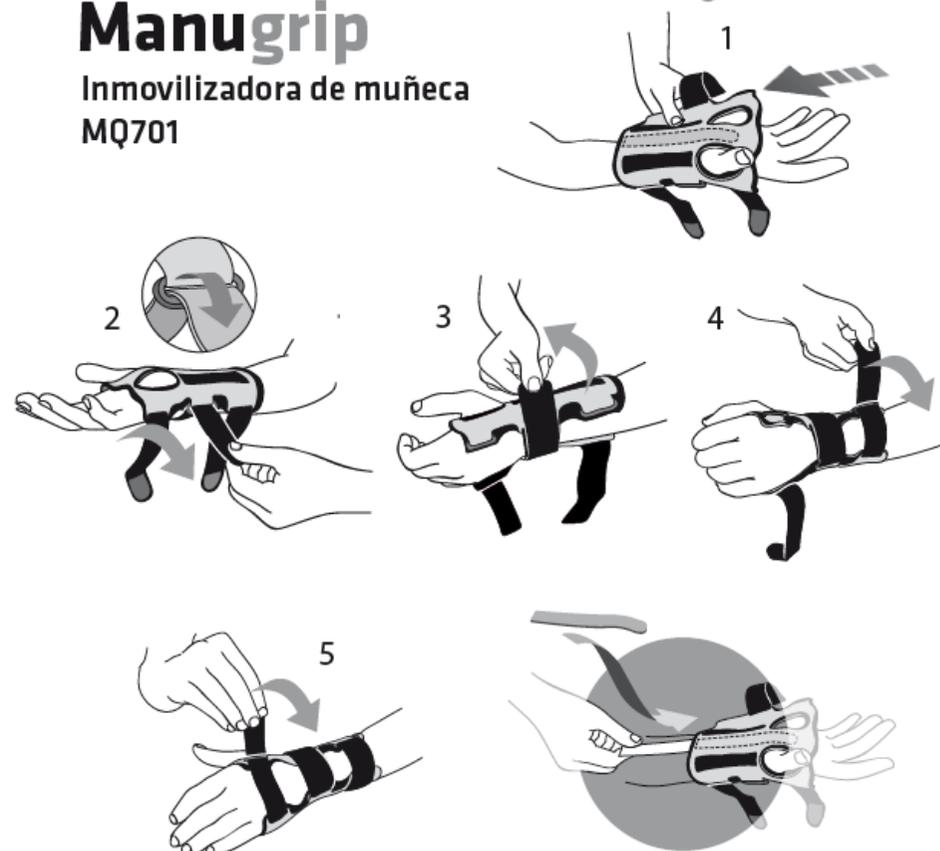

ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.
Pol. Ind. La Pascueta - Camino de La Pascueta, 40
46200 Paiporta (Valencia) España
www.emo.es +34 963 132 051

V.1 05/2021



MADE IN SPAIN

