

Cadeira de Banho

moem



DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

EC DECLARATION OF CONFORMITY



Declara que el producto / *This is to certify that the product*

Descripción / *Description:*

Silla de baño / Bath chair

Modelos / *Models:*

Moem

Fabricado por / *Manufactured by:*

TECNIMOEM 97, S.L.
Ctra. Logroño-Mendavia Km. 5
31230 Viana (Navarra)
España - Spain

Cumple con las disposiciones del **RD 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios** y que transpone la Directiva 93/42/CEE, modificada por la 2007/47/CE de 5 de septiembre de 2007.

Declaración según Anexo VII del RD 1591/2009.

Productos Sanitarios de clase I

Norma de referencia: UNE-EN 12183 “Sillas de ruedas de propulsión manual. Requisitos y métodos de ensayo”.

Complies with the requirements of RD 1591/2009 of 16th October, that regulates medical devices and implementing Directive 93/42/ECC, modified by Directive 2007/47/EC.

Declaration in accordance with Annex VII of RD 1591/2009. Medical devices class I

Reference standard: UNE-EN 12183 “Manual wheelchairs. Requirement and test methods”.

Viana, 02 de OCTUBRE de 2018

Firmado / *Signed:*

Ignacio Llanos Sáenz

Responsable Técnico / *Technical Manager*




Tecnimoem 97, S.L. - www.tecnimoem.com

Ctra. Logroño - Mendavia, Km. 5

31230 VIANA (Navarra)

T. +34 948 646 213 - F. +34 948 646 380


A

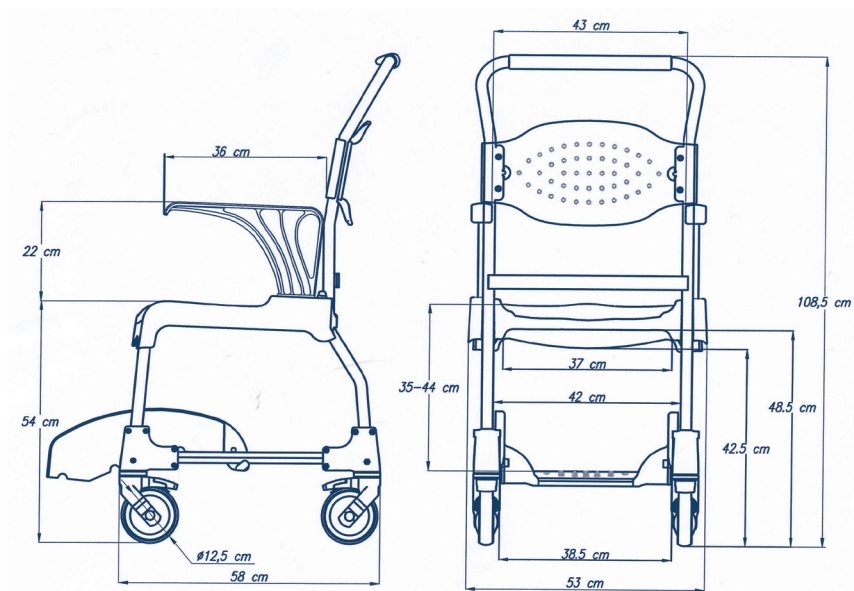


B



C

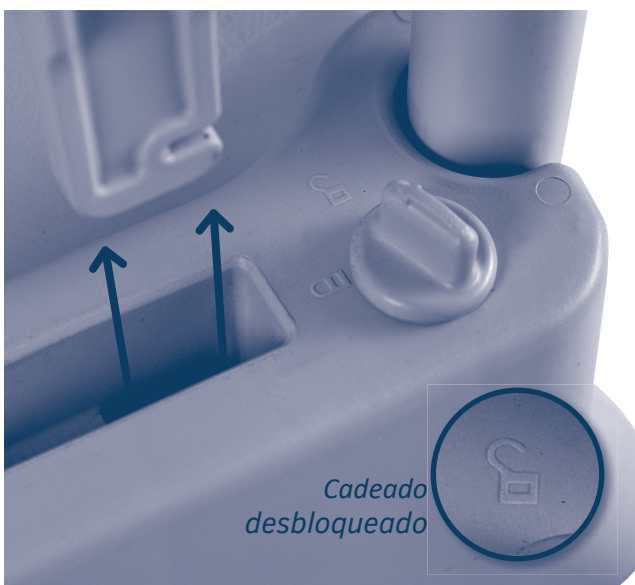

D

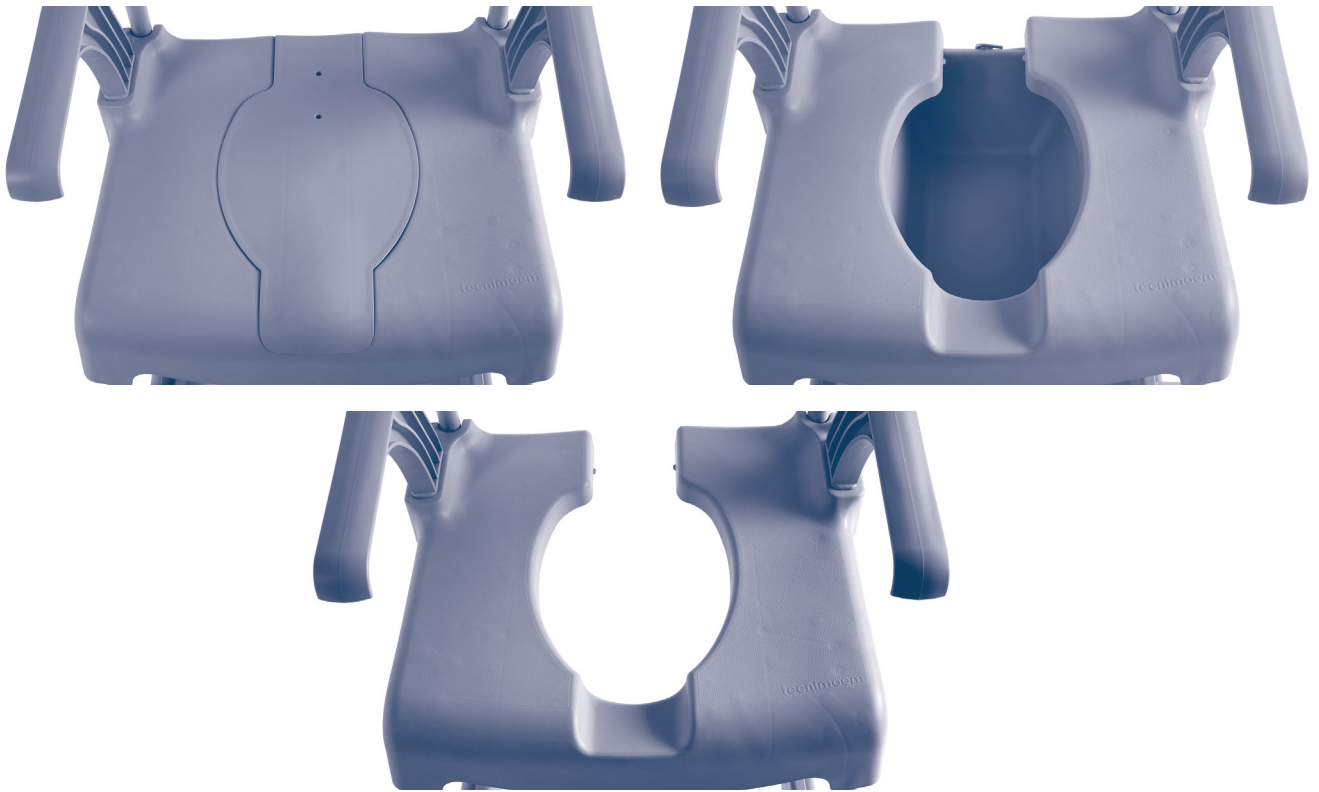

E



1/ GERAL



Para evitar danos durante o manuseamento ou utilização da cadeira, leia atentamente este manual.

MOEM é uma cadeira de duche e sanita concebida para tornar a higiene mais fácil para pessoas com dificuldades de mobilidade. Destina-se a ser utilizada num chuveiro, no lavatório ou sobre uma sanita, e também pode ser utilizada para o transporte de pacientes.

MOEM pode ser usado com pacientes com peso até 150 kg.

MOEM é considerado um produto de cuidados de saúde de classe I, sem os actuais regulamentos espanhóis sobre produtos de saúde.



Todas as imagens referidas estão nas páginas 4 e 5 do presente manual.

2/ DESCRIÇÃO E MEDIDAS Ver imagem A (pág. 4)

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| A 1 Encosto | A 5 Rodas com travão |
| A 2 Apoio de braços | A 6 Pega para o acompanhante |
| A 3 Assento | A 7 Cobertura de assento |
| A 4 Apoio de pés | |

3/ HANDLING Ver imagem B (pág. 4)

Ultrapassar pequenos degraus

Se a cadeira estiver vazia, colocar o pé sobre o componente de fixação da roda.

If the chair is occupied, use the care assistant's hand-hold with the chair facing backwards.

Brake the chair (image B 1)

Lock the wheels by stepping on the brake pedal. The chair is more stable if the wheels are turned outwards.

Transfer

Make sure the brake is on the wheels before starting to transfer the patient to another support (toilet, bed...). Remove the armrest beforehand if necessary.

4/ ARMREST See image C (page 4)

Armrest can be extracted using the wheel.

5/ SEAT COVER See image D (page 4)

Easy to extract.

6/ FOOTREST See image E (page 5)

Detachable and easy to use.
Adjustable to 5 positions.

7/ GARANTIA

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico. A garantia e a responsabilidade expiram em caso de intervenções por pessoal não autorizado ou não observância das instruções de utilização e manutenção.

8/ MANUTENÇÃO

Limpar regularmente com produtos não abrasivos.

Enxaguar e secar.

Manter as rodas e os travões livres de sujidade e sabão.

9/ SEGURANÇA



Não utilizar a cadeira se notar algum defeito.

Não o fazer pode resultar em danos materiais ou danos físicos.

Não ficar de pé no apoio para os pés (a cadeira pode capotar).

Cuidado com a cobertura do assento e com o apoio de braço, perigo de aprisionamento.

O doente não deve balançar na cadeira, porque pode virar.

Transferir o paciente a uma velocidade adequada.

* Não utilizar os apoios de braços para mover a cadeira.

* Evitar impactos com esquinas, rodapés, duchas... que podem danificar as peças plásticas.

10/ TECHNICAL SERVICE

Tecnimoem 97, S.L. has a dealer network for the sale of all its products. In the event of any problem, the end user must contact the dealer from which the product was purchased. Tecnimoem trains its dealers and provides them with sufficient spare parts to maintain the products.



TECNIMOEM 97, S.L. has a policy of continually improving its products. For that reason, device specifications may be changed without notice.

11/ END OF LIFE CYCLE

After the article's life cycle it should be taken to a recycling point. In this way you can help to protect the environment.



www.tecniemoem.com



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 910054418



Tecniemoem 97, S.L. Ctra. Logroño-Mendavia, Km. 5
31230 Viana (Navarra) - ESPAÑA (Spain)
Tel. +34 948 646 213 - Fax. +34 948 646 380
tecniemoem@tecniemoem.com