



MOPEDIA®

TRIPÉS E QUADRIPÉS MANUAL DE INSTRUÇÕES

**MANUAL DE INSTRUÇÕES DE BASTÕES DE TRÊS PERNAS
E QUATRO PERNAS**

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	Página 3
2. USO PRETENDIDO	Página 3
3. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE	Página 3
4. AVISOS GERAIS	Página 3
5. DESCRIÇÃO GERAL	Página 4
5.1 Códigos de tripé	Página 4
5.2 Códigos Quadripé.....	Página 4
5.3 Ajuste de altura.....	Página 4
5.4 Ajuste de uso da mão direita / esquerda	Página 4
6. ANTES DE CADA USO	Página 4
7. AVISOS DE USO	Página 4
8. MÉTODO DE USO	Página 5
9. MANUTENÇÃO	Página 5
10. LIMPEZA E DESINFECÇÃO	Página 5
10.1 Limpeza.....	Página 5
10.2 Desinfecção.....	Página 5
11. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO	Página 5
11.1 Condições gerais de eliminação.....	Página 5
12. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Página 6
12.1 Tripés.....	Página 6
12.2 Quadripés.....	Página 6
12.3 Peças sobressalentes.....	Página 7
13. GARANTIA	Página 7
13.1 Reparos.....	Página 7
13.2 Peças sobressalentes.....	Página 8
13.3 Isenção de responsabilidade	Página 8

Dispositivo Médico de Classe I

Decreto Legislativo 24/02/97 n.46 implementação da Diretiva CEE 93/42 e alterações subsequentes

1. Introdução

Obrigado por escolher um auxiliar da linha MOPEDIA by Moretti. Os tripés e quadripés Moretti foram projetados e construídos para atender todas as suas necessidades de uso prático, correto e seguro. Este manual contém algumas pequenas sugestões para o uso correto do dispositivo de sua escolha e alguns conselhos valiosos para sua segurança. É aconselhável ler atentamente todo este manual antes de usar o dispositivo. Em caso de dúvida, contacte o seu revendedor, que o poderá ajudar e aconselhar corretamente.

2. Uso pretendido

Os tripés e quadripés Moretti são auxiliares manuseados por um braço, adequados para apoiar e / ou auxiliar a mobilidade de pessoas com dificuldades de locomoção.

- É proibido o uso do seguinte dispositivo para finalidades diferentes das definidas neste manual.



- A Moretti SpA declina qualquer responsabilidade por danos decorrentes do uso indevido do dispositivo ou de um uso diferente do indicado neste manual
- O fabricante reserva-se o direito de fazer alterações no dispositivo e neste manual sem aviso prévio, a fim de melhorar suas características

3. Declaração de conformidade da CE

A Moretti SpA declara, sob sua exclusiva responsabilidade, que o produto fabricado e comercializado pela própria Moretti SpA está em conformidade com as disposições aplicáveis da diretiva 93/42 / CEE sobre dispositivos médicos e alterações subsequentes. Para este efeito, a Moretti SpA garante e declara sob sua exclusiva responsabilidade o seguinte:

- 1 Os dispositivos em questão cumprem os requisitos essenciais do anexo I da diretiva 93/42 / CEE, conforme prescrito pelo anexo VII da diretiva acima mencionada.
- 2 Os dispositivos em questão **ELES NÃO ESTÃO MEDINDO INSTRUMENTOS.**
- 3 Os dispositivos em questão **ELES NÃO SE DESTINAM A INVESTIGAÇÕES CLÍNICAS**
- 4 Os dispositivos em questão são vendidos em embalagens **NÃO ESTÉRIL**
- 5 Os dispositivos em questão devem ser considerados como pertencentes à classe I
- 6 **NÃO É PERMITIDO** usar e / ou instalar os dispositivos em questão fora do uso pretendido pela Moretti SpA
- 7 A Moretti SpA mantém e coloca à disposição das Autoridades Competentes a documentação técnica que comprova o cumprimento da Diretiva 93/42 / CEE e alterações posteriores.

4. Avisos gerais

- Para o uso correto do dispositivo, consulte este manual
- Verifique se o produto é entregue a você intacto e mantenha-o embalado longe de fontes de calor
- A vida útil do dispositivo é determinada pelo desgaste de peças não reparáveis e / ou substituíveis
- Sempre preste atenção à presença de crianças

5. Descrição geral

5.1 Códigos de tripé

- RP715** Tripé de alumínio anodizado para crianças com alça fechada
- RP719** Tripé de alumínio anodizado ajustável em altura de suporte braquial
- RP720** Tripé de alumínio anodizado ajustável em altura com alça aberta
- RP721** Tripé de alumínio anodizado ajustável em altura com alça fechada

5.2 Códigos Quadripé

- RP722** Quadripé em alumínio anodizado com ampla base de apoio braquial
- RP723** Quadripé em base larga de alumínio anodizado com alça aberta
- RP724** Quadripé em alça fechada de base larga de alumínio anodizado
- RP726** Quadripé em alça aberta de base estreita de alumínio anodizado (15x20cm)

Os Tripés e Quadripés MOPEDIA são fabricados em alumínio anodizado, possuem cabo anatômico e pontas de borracha antiderrapante. Ajustável em altura a cada 2,5 cm. Os dispositivos acima mencionados facilitam ficar em pé e andar. Eles dão estabilidade à pessoa em termos de equilíbrio e apoiam-na se houver problemas com a força. Peso máximo do paciente modelo adulto de 130 kg (exceto RP719 e RP722 - 100 kg), modelo infantil de 80 kg (RP715).

5.3 Ajuste de altura



Pressione o botão de mola e retire o cano trazendo-o até os orifícios de acordo com a altura desejada e à capacidade de manobra subjetiva do próprio paciente. Reposicione a trava no orifício para travar o cilindro e certifique-se de que a trava esteja inserida corretamente antes de usar o dispositivo.

5.4 Ajuste de uso da mão direita / esquerda

Pressione a trava e gire o cano 180°. Certifique-se de que a trava esteja totalmente inserida no orifício.

6. Antes de cada uso

- Verifique sempre o estado de desgaste das peças, de forma a garantir a utilização do aparelho com total segurança para pessoas e coisas
- Verifique a inserção correta do botão no orifício e a montagem do dispositivo

7. Advertências de uso

- Use com cuidado em superfícies molhadas e escorregadias
- Não exceda o peso máximo do paciente relatado no rótulo do produto e no capítulo de características técnicas deste manual
- Evite deixar o dispositivo ao ar livre e em contato com a água por um longo período de tempo

- Verifique periodicamente a estabilidade e robustez do produto, bem como o estado das pontas de borracha. Substitua-os quando usados
- Se você tiver alguma dúvida sobre o uso, ajuste ou manutenção do produto, entre em contato com o seu revendedor
- Para evitar quaisquer riscos, mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças

8. Como usar

Segure o dispositivo com a mão oposta à perna fraca e com o lado mais comprido do berço voltado para dentro. Traga o dispositivo para frente junto com o pé da perna fraca, colocando todo o peso na perna mais forte. Ao caminhar, tome cuidado para não colocar o dispositivo muito próximo ao corpo para evitar tropeçar em uma das pontas ou muito longe para evitar desequilíbrio. No caso de utilização em escadas, verifique se as dimensões do degrau são suficientes para conter a base do aparelho. Em seguida, a pessoa terá que levantar primeiro a perna mais forte, depois o dispositivo e, por fim, a perna mais fraca. Para descer as escadas você terá que avançar a perna afetada com o dispositivo e finalmente a perna sã. Se necessário, peça ajuda a um assistente.

9. Manutenção

Os dispositivos da linha MOPEDIA by Moretti no momento da colocação no mercado são cuidadosamente verificados e possuem a marca CE. Para a segurança do paciente e do médico, recomenda-se que o fabricante ou um laboratório autorizado verifique a adequação do seu produto para uso pelo menos a cada 2 anos. Em caso de reparos, apenas peças sobressalentes e acessórios originais devem ser usados.

10. Limpeza e desinfecção

10.1 Limpeza

Use apenas um pano húmido para remover a poeira, use um pano húmido com sabão neutro para remover a sujeira teimosa. Seque bem antes de usar.

10.2 Desinfecção

Se for necessário desinfetar o produto, use um detergente desinfetante comum.

NB Evite absolutamente o uso de produtos ácidos, alcalinos ou solventes, como por exemplo acetona ou diluente.

11. Condições de descarte

11.1 Condições gerais de descarte



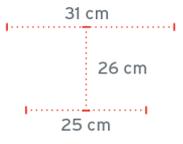
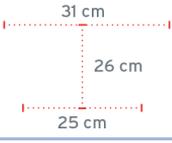
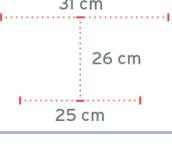
Em caso de descarte do dispositivo, nunca use os sistemas normais de descarte de resíduos sólidos urbanos. Em vez disso, recomenda-se eliminar o dispositivo através das ilhas ecológicas municipais comuns para as operações de reciclagem previstas dos materiais usados.

12. Características técnicas

12.1 Tripés

Códigos	Fluxo máximo	Altura ajustável	Lidar	Base
RP715	80 kg	De 66 a 73 cm	Pega anatômica fechada	
RP719	100 kg	76 a 98 cm	Alça de suporte braquial	
RP720	130 kg	De 75 a 97 cm	Cabo de esponja aberto	
RP721	130 kg	74 a 97 cm	Pega anatômica fechada	

12.2 Quadripés

Códigos	Capacidade máxima	altura ajustável	Lidar	Base
RP722	100 kg	76 a 98 cm	Alça de suporte braquial	
RP723	130 kg	De 75 a 95 cm	Alça anatômica aberta	
RP724	130 kg	74 a 96 cm	Pega anatômica fechada	
RP726	130 kg	De 75 a 95 cm	Alça anatômica aberta	

12.3 Peças sobressalentes

RV7036 (4 PCS)



Pontas de borracha macia para quadripés de base estreita Ø14mm

RV7033 (2pcs)



Pontas de borracha macia para tripés e quadripés com uma base larga Ø18mm

13. Garantia

Todos os produtos Moretti são garantidos contra defeitos de material ou fabricação por um período de 2 (dois) anos a partir da data de venda do produto, sujeito a quaisquer exclusões e limitações especificadas abaixo. Esta garantia não é válida em caso de uso indevido, abuso ou modificação do produto e em caso de não cumprimento das instruções de uso. O uso correto pretendido do produto é indicado no manual do usuário. Moretti não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes, lesões corporais ou qualquer outra coisa causada por ou relacionada à instalação e / ou uso do equipamento que não cumpra escrupulosamente com as instruções fornecidas nos manuais de instalação, montagem e uso. A Moretti não garante os produtos Moretti contra danos ou defeitos nas seguintes condições: desastres naturais, manutenção não autorizada ou operações de reparo, danos resultantes de problemas de fornecimento de energia (quando aplicável), uso de peças ou componentes não fornecidos pela Moretti, não cumprimento das diretrizes e instruções de uso, modificações não autorizadas, danos no transporte (exceto o envio original da Moretti) ou falha no desempenho manutenção conforme indicado no manual. Os componentes consumíveis não são cobertos por esta garantia se o dano for devido ao uso normal do produto.

13.1 Reparos

Reparação de garantia. No caso de um produto Moretti exibir defeitos de material ou de fabricação durante o período de garantia, a Moretti avaliará com o cliente se o defeito do produto está coberto pela garantia. A Moretti, a seu exclusivo critério, pode substituir ou reparar o item em garantia, em um revendedor Moretti especificado ou em sua sede. Os custos de mão de obra relacionados ao reparo do produto podem ser arcados pela Moretti se for determinado que o reparo está dentro do escopo da garantia. Um reparo ou substituição não renova ou estende a garantia.

Reparo de um produto não coberto pela garantia. Um produto não coberto pela garantia pode ser devolvido para reparos somente após ter recebido autorização prévia do serviço de atendimento ao cliente Moretti. Os custos de mão de obra e frete relacionados a um reparo fora da garantia serão totalmente arcados pelo cliente ou revendedor. Reparos em produtos não cobertos pela garantia têm garantia de 6 (seis) meses, a partir da data de recebimento do produto reparado.

Produtos sem defeito. O cliente será notificado se, após examinar e experimentar um produto devolvido, Moretti concluir que o produto não está com defeito. O produto será devolvido ao cliente e os portes de envio decorrentes da devolução serão por ele cobrados.

13.2 Peças sobressalentes

As peças sobressalentes originais Moretti têm garantia de 6 (seis) meses a partir da data de recebimento.

13.3 Isenção de responsabilidade

Exceto conforme expressamente especificado nesta garantia e dentro dos limites da lei, Moretti não oferece quaisquer outras representações, garantias ou condições, expressas ou implícitas, incluindo quaisquer representações, garantias ou condições de comercialização, adequação a uma finalidade específica, não violação e interferência de não violação. A Moretti não garante que o uso do produto Moretti seja ininterrupto ou livre de erros. A duração de quaisquer garantias implícitas que possam ser impostas por lei está limitada ao período de garantia, dentro dos limites da lei. Alguns estados ou países não permitem limitações sobre a duração de uma garantia implícita ou a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequenciais relacionados a produtos de consumo. Em tais estados ou países, algumas exclusões ou limitações desta garantia podem não se aplicar a você. Esta garantia está sujeita a alterações sem aviso prévio.



Pantone 7452C
Pantone 431C

CERTIFICADO DE GARANTIA

Produtos _____

Adquirido em _____

Distribuidor _____

Rua _____ Localização _____

Vendido a _____

Rua _____ Cidade _____



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Ph. +39 055 96 21 11

www. **Morettispa** .com

email: info @ **Morettispa** .com

FEITO NA RPC



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022
Cavigliola (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11

Fax. +39 055 96 21 200 [www. Moretti
spa.com](http://www.Moretti-spa.com)
info @ [Moretti spa.com](mailto:Moretti-spa.com)