

CUIDADOS E UTILIZAÇÃO DO SEU PROTETOR **BLOCCS**[®]

Obrigado por escolher o Bloccs[®]. Leia atentamente as instruções que se seguem antes de utilizar o seu protetor Bloccs[®] ou de supervisionar uma criança a utilizá-lo. Isto garantirá que o protetor é utilizado com segurança e que a vedação estanque é eficaz. A decisão de utilizar o protetor Bloccs[®] ao tomar banho, duche ou ao praticar qualquer outra atividade aquática é da sua inteira responsabilidade. Deve consultar um médico para se certificar de que a atividade não irá afetar a lesão.

Como colocar o seu protetor Bloccs[®]

Como o seu protetor Bloccs[®] é feito de látex de borracha natural, deve retirar quaisquer joias pontiagudas e ter cuidado para não perfurar o material com as unhas. Cubra as arestas com fita adesiva ou uma ligadura elástica.

Antes de usar, esfregue o protetor com as mãos e estique-o suavemente. Para verificar se a vedação se ajusta bem, experimente a capa no braço ou na perna que não tem gesso. Se a vedação parecer demasiado apertada ou demasiado folgada ao experimentá-la, escolha um protetor de tamanho diferente.

A vedação lisa, justa à pele e impermeável deve esticar-se facilmente sobre um penso. Siga os nossos guias fáceis de cinco passos incluídos neste folheto para o ajudar a colocar os seus protetores Bloccs[®] para braço/perna e cotovelo/joelho.

Utilização do seu protetor Bloccs[®]

O protetor Bloccs[®] destina-se a manter um penso seco enquanto este está exposto à água ou imerso nela. Os protetores Bloccs[®] utilizam o mesmo tipo de vedação que se encontra nos fatos secos.

Antes de entrar na água, retire todo o ar do protetor Bloccs[®] massajando

Puxe a cobertura para cima, na direção da vedação, para libertar o ar retido. Isto também pode ser feito baixando gradualmente o membro para dentro da água, de modo a que a pressão da água empurre o ar para a parte superior do protetor.

Puxe suavemente a vedação para longe da pele para remover o ar antes de mergulhar, certificando-se de que não entra água no protetor.

O protetor deve ser colocado imediatamente antes de entrar na água e removido assim que sair.

A decisão de entrar na água é tomada por sua conta e risco. Não deve saltar nem mergulhar numa piscina. Os protetores não foram concebidos para mergulho, snorkelling ou quaisquer outros desportos aquáticos.

Recomendamos que o protetor Bloccs[®] seja verificado regularmente durante a utilização para garantir que a vedação permanece estanque e continua a ser confortável.

O protetor pode ser usado por até 30 minutos — desde que continue confortável, não fique muito apertado e seja verificado regularmente. Usar o protetor por mais de 30 minutos pode resultar em ar preso, causando transpiração e desconforto.

AS CRIANÇAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS NA PISCINA OU NO MAR EM TODOS OS MOMENTOS.

Como retirar o seu protetor

Para retirar o protetor, deslize-o cuidadosamente sobre o penso ou o gesso no seu braço ou perna. Deve ter-se cuidado para garantir que as juntas não sejam danificadas pelas unhas ou por joias.

Cuidados com o protetor

Bloccs®

O protetor Bloccs® está sujeito a desgaste, mas deve durar cerca de 4 semanas em condições normais de utilização.

O protetor deve ser verificado antes de cada utilização para garantir que não há sinais de danos ou desgaste.

Se o protetor se tiver deteriorado ou danificado de alguma forma, deve ser adquirido um substituto.

Os protetores devem ser armazenados a uma temperatura inferior a 26 °C (78,8 °F) e mantidos afastados de aquecedores. Em condições de frio extremo, o protetor pode ficar rígido: isto não é permanente e o aquecimento irá corrigir o problema.

Devem evitar-se condições de armazenamento húmidas. Evite expor o protetor à luz durante longos períodos — em particular à luz solar direta e à luz artificial com elevado teor de raios UV.

O protetor Bloccs® pode ser lavado em água morna e deve ser secado cuidadosamente por dentro e por fora. Polvilhar levemente o interior com talco facilitará a colocação do protetor Bloccs®. Não seque o protetor na máquina de secar nem sobre um radiador.

Evite o contacto com cobre, ligas que contenham cobre, solventes, óleos e graxas, pois estes podem danificar o protetor Bloccs®.

Mantenha afastado de chamas vivas, pois isso pode resultar em lesões corporais graves e até mesmo na morte.

Se tiver alguma dúvida sobre o seu protetor Bloccs®, envie-nos uma mensagem através da sua conta Amazon.

A Bloccs® reserva-se o direito de modificar o manual conforme considerar apropriado. Como consumidor, é da sua responsabilidade verificar a versão online do manual para se inteirar de quaisquer modificações.

AVISO: Os protetores Bloccs® podem tornar-se escorregadios quando molhados. Utilize um tapete antiderrapante no chuveiro ou na banheira e tenha outro tapete antiderrapante ou uma toalha à mão para quando sair. Não deve andar à beira da piscina enquanto estiver a usar um protetor Bloccs® e deve ter um cuidado redobrado ao utilizar os degraus da piscina, uma vez que estes podem ser escorregadios. Segure-se firmemente no corrimão.

AVISO: Os protetores Bloccs® não são brinquedos. Para evitar o risco de asfixia, mantenha o produto e a sua embalagem fora do alcance de crianças e bebés.

AVISO: O látex de borracha natural pode causar uma reação alérgica. Se estiver sob cuidados médicos, obtenha a aprovação do seu médico antes de utilizar o protetor.

AVISO: Deve ter-se especial cuidado ao submergir gessos nas pernas na água, uma vez que podem ser pesados e restringir os movimentos. Não deve tentar nadar com um gesso na perna.

AVISO: Deve ter-se cuidado com cateteres PICC ou linhas IV.

Não é possível fornecer avisos sobre todos os perigos possíveis relacionados com a utilização deste produto. Por conseguinte, aconselha-se os consumidores a usarem o bom senso e o bom julgamento ao utilizarem um protetor Bloccs®.


BLOCCS®

COMO COLOCAR UM PROTETOR DE BRAÇO OU PERNA

BLOCCS®

O protetor deve ser utilizado de acordo com todas as instruções de cuidados e utilização.

Visite www.bloccs.com para ver os nossos vídeos de demonstração e consultar as nossas perguntas frequentes.

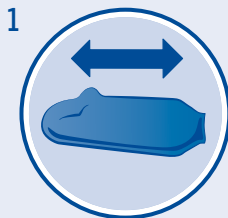

Retire o protetor da embalagem e desdobre-o. Retire quaisquer anéis pontiagudos, etc.



Antes de utilizar, esfregue a vedação com as mãos e estique-a suavemente.



A partir da extremidade aberta, dobre o protetor para trás até meio.



Para verificar se a vedação se ajusta bem, experimente primeiro a capa no braço ou na perna que não tem gesso nem penso. Coloque o braço ou a perna em questão na extremidade aberta, de modo a que o pé ou a mão fiquem na ponta do protetor.




Enrole o protetor pelo braço ou pela perna até que a vedação fique bem ajustada à pele. Se a vedação parecer demasiado apertada ou demasiado folgada ao experimentá-lo, escolha um protetor de tamanho diferente. Deixe sair um pouco de ar para evitar que flutue.

BLOCCS®

COMO COLOCAR UM PROTETOR DE JOELHO OU DE COTOVELO BLOCCS®


O protetor deve ser utilizado de acordo com todas as instruções de cuidados e utilização. Visite www.bloccs.com para ver os nossos vídeos de demonstração e consultar as nossas perguntas frequentes.

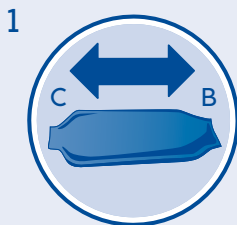


Retire o protetor da embalagem e desdobre-o. Retire quaisquer anéis pontiagudos, etc. O protetor tem duas extremidades: uma mais larga para ajustar à volta do bíceps ou da coxa (B) e uma mais estreita para ajustar à volta do pulso ou da parte inferior da panturrilha (C).




Antes de utilizar, esfregue as juntas uma contra a outra com as mãos e estique-as suavemente.

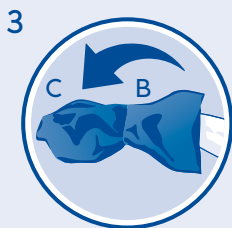

Para colocar o protetor com facilidade, pegue na extremidade B e vire metade do protetor do avesso, de modo a que fique logo acima da extremidade C.

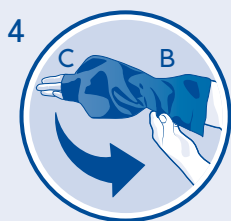

Para verificar se a vedação fica bem ajustada, experimente primeiro a manga no braço ou na perna que não tem gesso nem penso. Passe lentamente a mão ou o pé pelas duas extremidades, B e C. Em seguida, enrole cuidadosamente a extremidade B até que assente perfeitamente no braço ou na coxa.

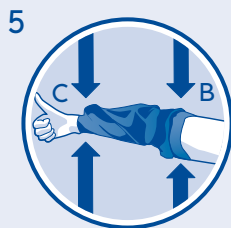

A área de curativo deve ficar totalmente coberta, e deve formar-se uma vedação impermeável, lisa e bem ajustada à pele, em torno do braço ou da perna, em ambas as extremidades do protetor. Se a vedação parecer demasiado apertada ou demasiado folgada ao experimentá-lo, escolha um protetor de tamanho diferente. Deixe sair um pouco de ar para evitar que ele flutue.

BLOCCS®

SYMBOL GLOSSARY

	Fabricante
	Certificado de conformidade
	Dispositivo Médico
	Identificador Único do Dispositivo
	Quantidade de dispositivos
	Código do lote
	Data de Fabrico
	Distribuidor
	Representante autorizado na União Europeia
	Representante autorizado na Suíça
	Importador
	Atenção
	Contém látex de borracha natural
	Superfície escorregadia
	Risco de asfixia
	Manter afastado da luz solar
	Armazenar entre 5 e 26 °C (42-78 °F)
	Um único doente – utilização múltipla
	Não esterilizado
	Consulte as instruções de utilização
	Embalagem Reciclável
	Proibido o uso de chamas vivas