

APRENDA A UTILIZAR O SEU iWALK EM 3 PASSOS FÁCEIS

1

Montagem

A montagem do iWalk3.0 é fácil, rápida e não requer ferramentas.



Assista aos nossos vídeos instrutivos:
Escaneie o código QR ou visite
www.iwalk-free.com/get-started




2

AJUSTE


AJUSTE PERSONALIZADO DO IWALK PARA SUA PERNA

O AJUSTE ADEQUADO É ESSENCIAL! Mas é fácil se você seguir nossas instruções em vídeo. Ajuste o iWALK para que ele se encaixe perfeitamente em você.


Acerte esses três pontos e você estará usando o iWALK em minutos. Mostraremos como.

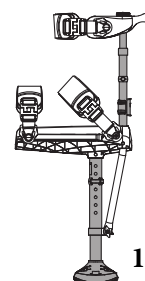

1.ALATURA

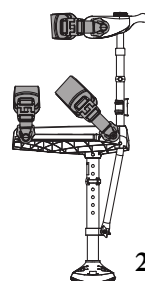

2.AJUSTE

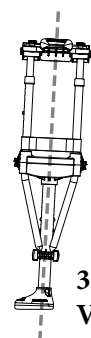

3.ALINHAMENTO VERTICAL



Assista aos nossos vídeos instrutivos:
Escaneie o código QR ou visite
www.iwalk-free.com/get-started



3

SEUS PRIMEIROS PASSOS NO IWALK

Nossas instruções em vídeo mostram como ficar em pé, caminhar, usar escadas, calçar e descalçar.

Saiba mais sobre:

Caminhar com as mãos livres

Ambiente correto para aprendizado

Erros comuns

Ajustes para máxima eficiência



Assista aos nossos vídeos instrutivos:
Escaneie o código QR ou visite
www.iwalk-free.com/get-started



Escaneie o código QR abaixo ou visite
nosso site para assistir aos vídeos
instrutivos



Ou

www.iwalk-free.com/get-started

Guia do Usuário em PDF disponível para download

PRECISA DE AJUDA?
Não está satisfeito?



Peças faltando?



Dificuldades de montagem?



Problemas de adaptação?

Antes de devolver
Entre em contato com nossa equipe de suporte:



562-653-4222

Monday to Friday 8:00 AM-4:00 PM PST

support@iwalk-free.com



Or visit
www.iwalk-free.com/support

Informação Regulamentar e de Conformidade

• Declaração de utilização prevista: Este dispositivo destina-se a um único utilizador, um indivíduo sem deficiência física com peso inferior a 126 kg, que necessite de descarregar um único membro inferior durante a marcha, sem utilização simultânea de outros dispositivos de assistência (bengala ou muletas) em ambientes normais, interiores e exteriores, entre 0 °C e 40 °C.

• Vida útil prevista do produto: 150 dias a 6000 passos no total por dia para o utilizador mais pesado; prevista para mais tempo para utilizadores mais pequenos.

• Instruções de limpeza: Enxaguar com água limpa e deixar secar, garantindo que não permaneça líquido.
• O dispositivo não se destina a utilização sem supervisão por pacientes com problemas de equilíbrio significativos ou dificuldades cognitivas.

△Os utilizadores com deficiência cognitiva devem procurar a ajuda de uma pessoa qualificada para utilizar o dispositivo.

△ Utilize o dispositivo apenas após a montagem adequada, de acordo com as instruções de pessoal qualificado.

△Se não compreender estas instruções, pare e procure assistência qualificada.

△ O dispositivo destina-se a ser utilizado por um único utilizador, não se destinando ao aluguer ou revenda.

△Inflamabilidade: Este dispositivo não incorpora materiais autoextinguíveis ou retardadores de fogo.

△Não exponha a fontes externas de calor ambiente ou chamas abertas. Não armazene nem deixe sob luz solar direta, e não utilize quando estiver dolorosamente quente ao toque até que o dispositivo arrefeça.

△Não coloque dedos ou pequenos apêndices dentro ou perto de orifícios ou aberturas em forma de V,enquanto estiver em uso ou parado.

△Não ingira quaisquer componentes do dispositivo. Não monte nem desmonte na presença de crianças pequenas.

△Interrompa a utilização se houver qualquer indício de lesão nos tecidos moles associada à utilização ou ao uso do dispositivo.

△O dispositivo não responde a comandos verbais ou telepáticos.

△O dispositivo não possui peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Siga as instruções de montagem originais ao substituir uma peça.

△O dispositivo não se destina a utilização sem supervisão por pacientes com problemas de equilíbrio significativos ou dificuldades cognitivas.

△Os utilizadores com deficiência cognitiva devem procurar assistência de uma pessoa qualificada para utilizar o dispositivo

△Utilize o dispositivo apenas após a montagem adequada, de acordo com as instruções de pessoal qualificado.

△Se não compreender estas instruções, pare e procure assistência qualificada.

△O dispositivo destina-se a ser utilizado por um único utilizador, não sendo para aluguer ou revenda.

△Inflamabilidade: Este dispositivo não incorpora materiais autoextinguíveis ou retardadores de fogo.

△Não exponha a fontes externas de calor ambiente ou chamas abertas. Não armazene nem deixe exposto à luz solar direta e não utilize quando estiver dolorosamente quente ao toque até que o dispositivo arrefeça.

△Não coloque os dedos ou pequenos membros dentro ou perto de orifícios ou aberturas em forma de V, enquanto estiverem em uso ou parado.

△Não ingira nenhum componente do dispositivo. Não monte ou desmonte na presença de crianças pequenas.

△Interrompa a utilização se houver qualquer indício de lesão nos tecidos moles associada à utilização ou ao uso do dispositivo.

△O dispositivo não possui peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Siga as instruções de montagem originais ao substituir uma peça.

△O dispositivo contém componentes metálicos. NÃO USE NEM UTILIZE durante exames de imagem médica de qualquer tipo, incluindo ressonância magnética.




cepartner**4U** , Esdoornlaan 13, 3951 DB Maarn, The Netherlands

IWF10450 revG



Tenha este diagrama à mão quando ligar para a iWALKFree para obter assistência técnica .

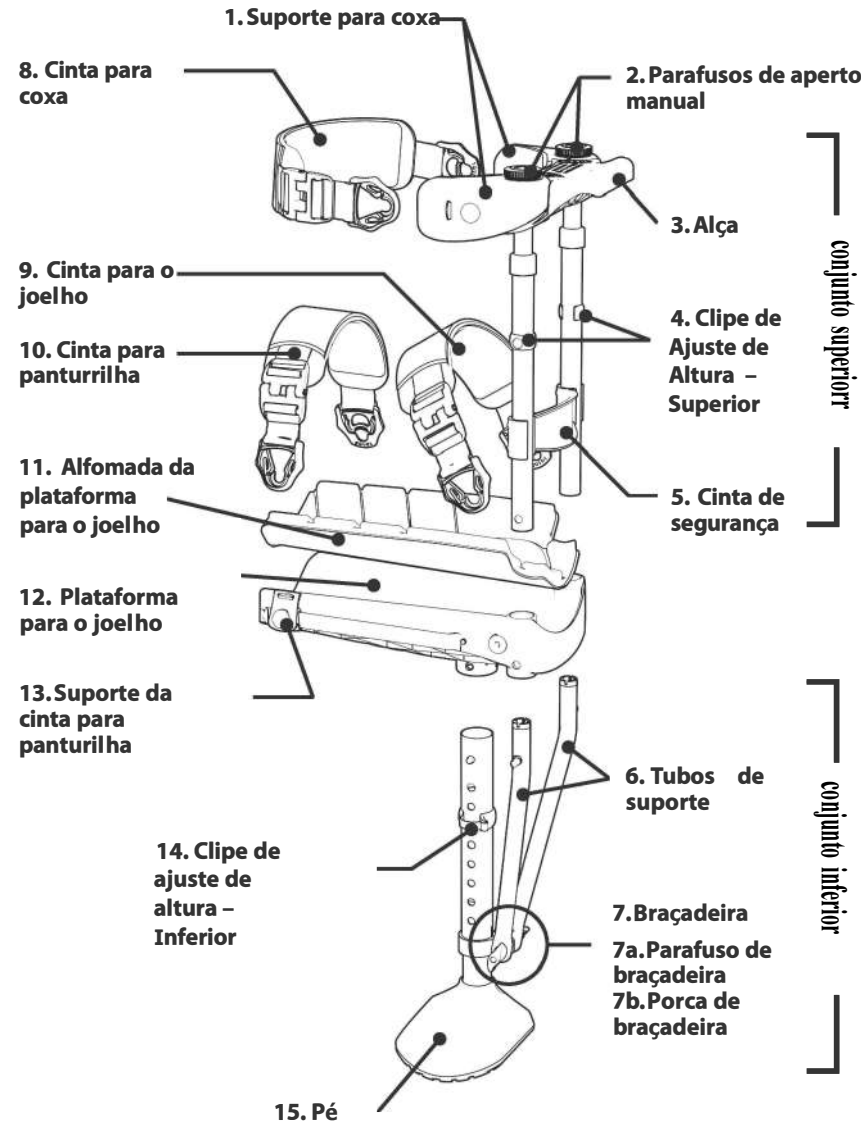

iWALKFree
Technical
Support

www.iwalk-free.com/support

562 653-4222

support@iwalk-free.com

iWALK3.0

Hands Free Crutch

Quick Start Guide

